

# *Printer Driver*

---

## Asennusopas

Tässä oppaassa kuvataan Windows Vista-, Windows XP- ja Windows 2000 -järjestelmiin tarkoitettujen tulostinohjaimien asennus.

### **Ennen tämän ohjelmiston käyttöä**

Lue ”ReadMe”-tiedosto ennen tulostinohjaimen käyttöä.

---

# Sisällysluettelo

<b>Käyttöympäristövaatimukset .....</b>	<b>3</b>
<b>Tietoja tästä asiakirjasta .....</b>	<b>3</b>
<b>Tulostinohjaimen asentaminen</b>	
<b>Windows Vistaan .....</b>	<b>4</b>
Ennen asennusta .....	4
Asentaminen Windows Vistassa .....	4
Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Windows Vistassa .....	7
<b>Tulostinohjaimen asentaminen</b>	
<b>Windows XP:hen .....</b>	<b>8</b>
Ennen asennusta .....	8
Asennus Windows XP:hen .....	8
Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Windows XP:ssä .....	10
<b>Tulostinohjaimen asentaminen</b>	
<b>Windows 2000:een .....</b>	<b>11</b>
Ennen asennusta .....	11
Asennus Windows 2000:een .....	11
Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Windows 2000:ssa .....	14

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.  
Muut tässä oppaassa mainitut yritys- ja tuotenimet ovat myös tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä.

# Käyttöympäristövaatimukset

Tulostinohjaimen käyttö edellyttää, että tietokoneessa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä.

- Microsoft Windows Vista (64-bittistä versiota ei tueta)
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition (64-bittistä versiota ei tueta)
- Microsoft Windows 2000 Professional

## Tietoja USB 2.0:sta

- Tulostin on USB 2.0 -vaatimusten mukainen.
- USB 2.0 on taaksepäin yhteensopiva USB 1.1:n kanssa.
- USB 2.0 tukee sekä perinteistä Full-täysnopeustoimintoa (alhainen nopeus) että Hi-Speed-suurnopeustoimintoa.
- USB 1.1 -ympäristössä kytkeminen ja käyttö täysnopeudella on mahdollista. Hi-Speed-suurnopeuskäytössä on täytettävä seuraavat vaatimukset.
  - Tietokone  
Tietokone tukee Hi-Speed USB:tä (USB 2.0 -yhteensopiva)\*
  - Käyttöjärjestelmä  
Windows Vista, Windows XP Professional/Home Edition tai Windows 2000 Professional
  - USB 2.0 -ohjain  
Microsoft Corporationin tuottama USB 2.0 -laiteohjain (muuta USB 2.0 -ohjaimia käytettäessä toimintaa ei taata.)
  - Sertifioitu USB 2.0 -kaapeli

\* Yhteensopivuutta kaikkien USB 2.0 -laitteiden, USB 2.0 -laajennuspiirikorttien tai -lisäkorttien kanssa ei voida taata.

### Huomautus

Kun tulostin on yhdistetty tietokoneeseen ja sen virta on kytketty, varmista, ettei tietokone mene lepotilaan, valmiustilaan (keskeytystilaan) eikä horrostilaan. Muuten toiminnan virheettömyyttä ei voida taata.

# Tietoja tästä asiakirjasta

Tämän asiakirjan Ohjauspaneelin toimintoja koskeissa selityksissä oletetaan, että Windowsissa on käytössä Classic View -tila. Classic View saadaan käyttöön napsauttamalla [Start]-painiketta, valitsemalla [Control Panel] ja napsauttamalla kuvaruudun vasemmalla puolella näkyvissä Ohjauspaneelin ominaisuuksissa olevaa [Switch to Classic View]-painiketta.

Tässä oppaassa esitetyt kuvaruutuviestit perustuvat oletukseen, että tietokoneeseen on kytketty UP-DR80MD-tulostin. Jos käytät jotakin muuta tulostinta, korvaa kaikki mallinimen ”UP-DR80MD” esiintymät oman tulostimesi mallinimellä lukiessasi tämän oppaan viestejä.

# Tulostinohjaimen asentaminen Windows Vistaan


## Ennen asennusta


### Versiopäivityksistä

Jos päivität tulostinohjaimen, poista edellinen tulostinohjain ennen asennuksen aloittamista. Katso lisätietoja tulostinohjaimen poistamisesta tämän oppaan kohdasta ”Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Windows Vistassa”.

Jos asennus ei onnistu tai se peruutetaan, käynnistä tietokone uudelleen, ennen kuin yrität asennusta uudelleen.

### USB 2.0 -liitäntä


Tulostin on USB 2.0 -vaatimusten mukainen. Jos tietokone tai USB-keskitin ei ole USB 2.0 -yhteensopiva, tulostinta kytkettäessä tulee näkyviin seuraava ilmoitus. Sulje ilmoitus napsauttamalla  -painiketta.

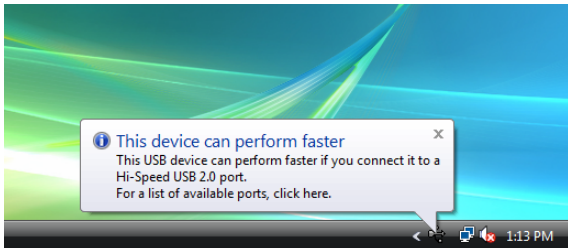

## Asentaminen Windows Vistassa

- 1 Kytke tietokoneeseen se tulostin (vain yksi), jonka tulostinohjaimen haluat asentaa tietokoneeseen.
- 2 Kytke tulostimeen virta.
- 3 Käynnistä tietokone ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojar ryhmän jäsenenä.

[Found New Hardware]-valintaikkuna tulee näkyviin.

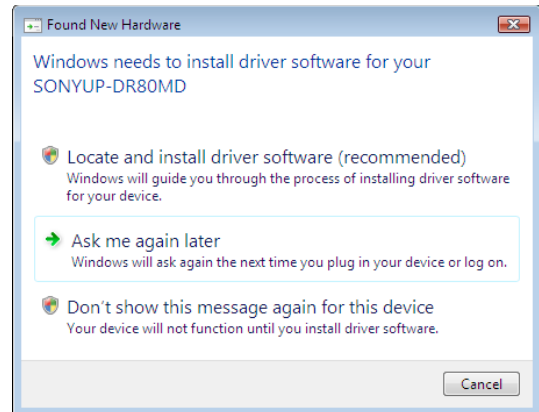


Jos näkyviin tulee ”Device driver software was not successfully installed” eikä [Found New Hardware]-valintaikkuna tule näkyviin, irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Jos [Found New Hardware]-valintaikkuna ei vielääkään tule näkyviin, suorita alla kuvatut vaiheet, kun tulostin, jonka tulostinohjainta olet asentamassa, on käynnissä ja kytkettynä tietokoneeseen. (Muita USB-tulostimia tai aiemmin asennettuja tulostimia ei tällöin saa olla kytkettynä.)

- ① Napsauta [Start]-painiketta ja valitse [Control Panel].
- ② Kaksoinapsauta kohtaa [System].
- ③ Napsauta [Device Manager]-painiketta. [User Account Control]-valintaikkuna tulee näkyviin.
- ④ Napsauta [Continue]-painiketta. [Device Manager]-ikkuna tulee näkyviin.
- ⑤ Napsauta [Universal Serial Bus controllers]-säätimien vasemmalla puolella olevaa [+] -painiketta.
- ⑥ Valitse [USB Printing support] ja valitse sitten [Action]-valikosta [Uninstall].
- ⑦ Käynnistä tietokone uudelleen. [Found New Hardware]-valintaikkuna tulee näkyviin.


- 4 Napsauta painiketta [Locate and install driver software (recommended)].

Seuraava valintaikkuna tulee näkyviin.

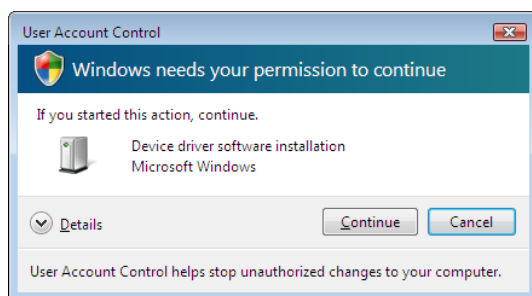


- 5 Napsauta [Continue]-painiketta.

- 6 Napsauta [Don't search online]-painiketta, jos näkyviin tulee seuraava valintaikkuna.

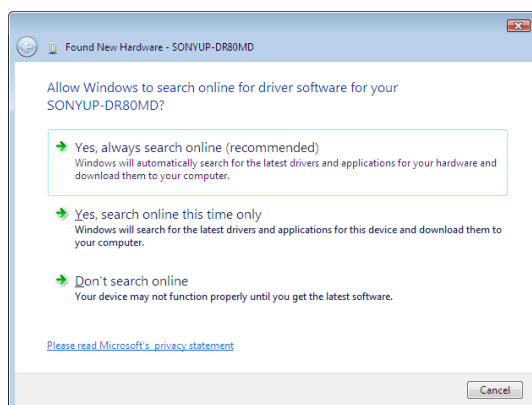

Näkymä muuttuu seuraavasti.

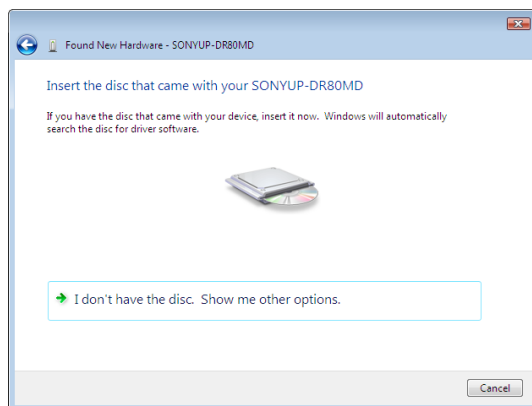


Tämän jälkeen toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, käytätkö mukana toimitettua CD-levyä vai et (jos olet ladannut ohjaimen verkosta).


## Toimenpiteet mukana toimitettua CD-levyä käytettäessä

- 7 Laita CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.

Näkymä muuttuu seuraavasti.

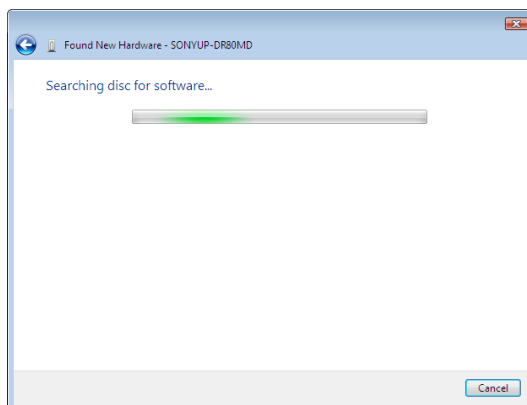


Kun ohjelmiston etsintä on valmis, näkyviin tulee seuraava valintaikkuna.

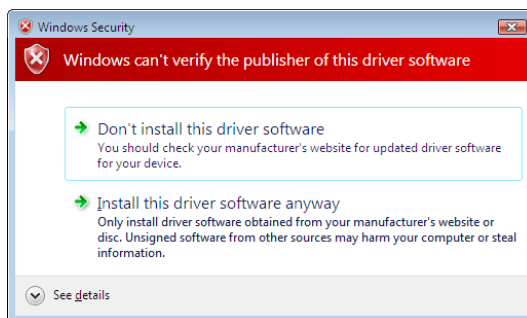


- 8 Napsauta [Install this driver software anyway]-painiketta.

Valintaikkuna sulkeutuu, ja [Found New Hardware]-valintaikkuna tulee uudelleen näkyviin.

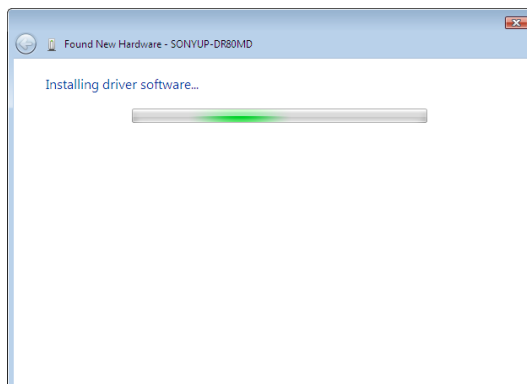

Kun tiedostot on kopioitu, näkymä muuttuu seuraavasti.

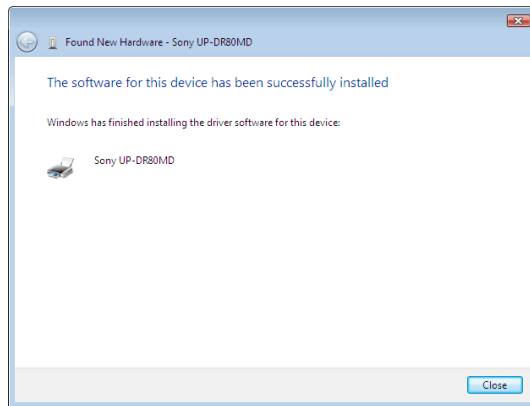


9 Napsauta [Close]-painiketta.

Tulostinohjain on asennettu.

## Toimenpiteet ilman mukana toimitettua CD-levyä


7 Napsauta painiketta [I don't have the disc. Show me other options].

Näkymä muuttuu seuraavasti.

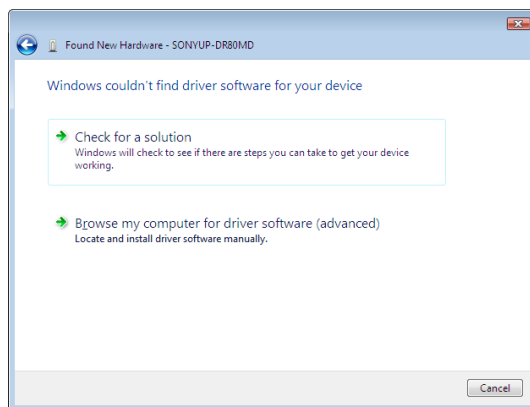

8 Napsauta painiketta [Browse my computer for driver software (advanced)].


Näkymä muuttuu seuraavasti.

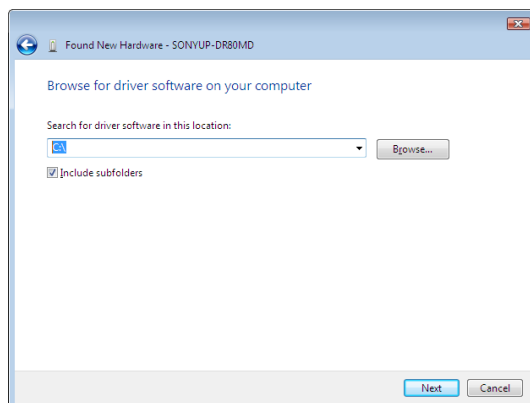

9 Avaa [Browse For Folder]-valintaikkuna napsauttamalla [Browse]-painiketta. Määritä kansio, johon lataamasi asennustiedosto on purettu, ja sulje sitten [Browse For Folder]-valintaikkuna napsauttamalla [OK]-painiketta.


10 Napsauta [Next]-painiketta.

Seuraava valintaikkuna tulee näkyviin.

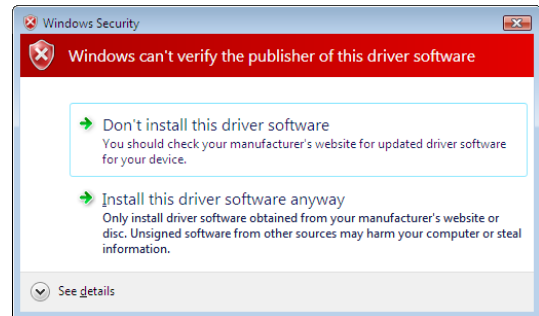


11 Napsauta [Install this driver software anyway]-painiketta.

Valintaikkuna sulkeutuu, ja [Found New Hardware]-valintaikkuna tulee uudelleen näkyviin.

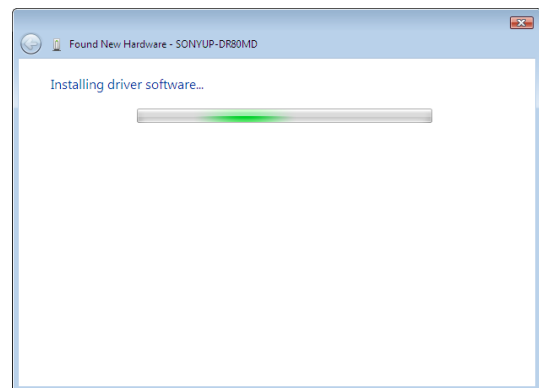

Kun tiedostot on kopioitu, näkymä muuttuu seuraavasti.

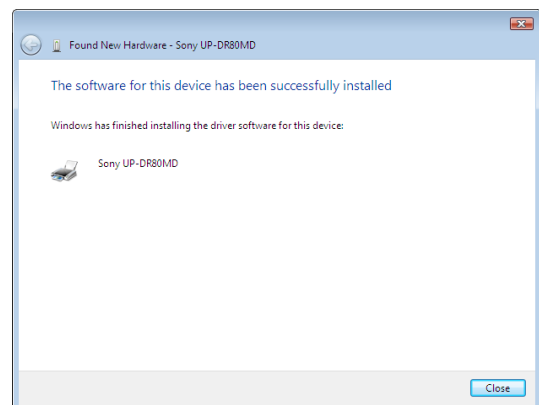

12 Napsauta [Close]-painiketta.

Tulostinohjain on asennettu.


# Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Windows Vistassa

Tässä osiossa kuvataan, miten tulostinohjain poistetaan.


## Huomautus

Asennuksen poistoa aloitettaessa tulostin ei saa olla kytkettynä tietokoneeseen. Jos [Found New Hardware]-valintaikkuna tulee näkyviin, irrota tietokoneen ja tulostimen yhdistävä kaapeli, sulje valintaikkuna napsauttamalla kaikkien ruutujen [Cancel]-painiketta ja aloita asennuksen poisto uudelleen.


- 1 Katkaise tulostimen virta ja irrota tietokoneen ja tulostimen välinen kaapeli.
- 2 Käynnistä tietokone ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojatryhmän jäsenenä.
- 3 Napsauta [Start]-painiketta, valitse [Control Panel] ja valitse sitten [Programs and Features].

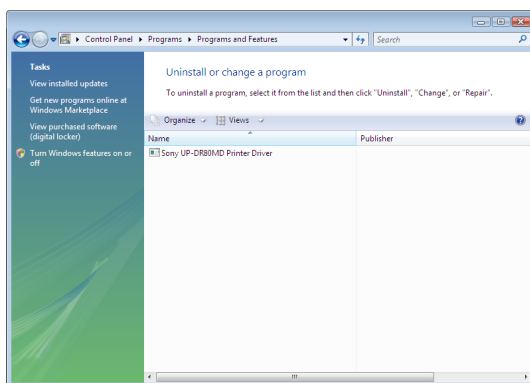

- 4 Valitse tulostinohjain [Uninstall or change a program]-luettelosta ja napsauta sitten [Uninstall/Change]-painiketta.

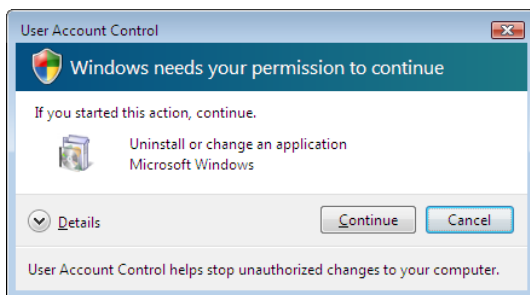


- 5 Napsauta [Continue]-painiketta.

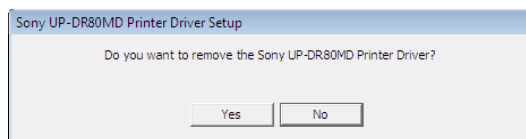

- 6 Valitse [Yes].

Kun tulostinohjaimen asennus on poistettu, näkyviin tulee seuraava valintaikkuna.

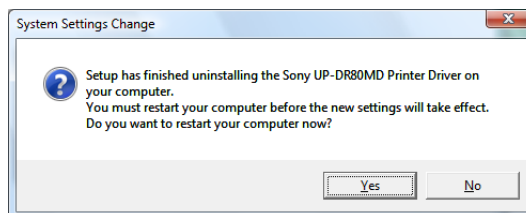

- 7 Valitse [Yes].

Tietokone käynnistyy uudelleen.

Tulostinohjaimen asennus on poistettu.

# Tulostinohjaimen asentaminen Windows XP:hen

## Ennen asennusta

### Tietoja versiopäivityksistä


Jos päivität tulostinohjaimen, poista edellinen tulostinohjain ennen asennuksen aloittamista. Katso lisätietoja tulostinohjaimen poistamisesta tämän oppaan kohdasta ”Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Windows XP:ssä”.


Jos asennus ei onnistu tai se peruutetaan, käynnistä tietokone uudelleen, ennen kuin yrität asentaa uudelleen.

#### Huomautus

Muista käynnistää tietokone uudelleen tulostinohjaimen asennuksen tai asennuksen poiston jälkeen. Jollet käynnistä tietokonetta uudelleen, se saattaa toimia epävakaasti.


### USB 2.0 -liitäntä

Tulostin on yhteensopiva USB 2.0:n kanssa. Jos tietokone tai USB-keskitin ei ole USB 2.0 -yhteensopiva, tulostinta kytkettäessä tulee näkyviin seuraava ilmoitus. Sulje ilmoitus napsauttamalla  -painiketta.

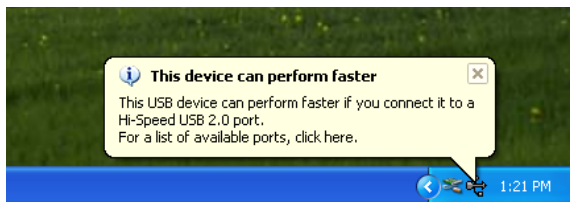

### Tietoja ohjaimien allekirjoitusasetuksista

Nykyinen tulostinohjaimen versio ei ole läpäissyt Windows-logon käytölle asetettuja testejä. Tämän vuoksi järjestelmä saattaa antaa asennuksen aikana virheilmoituksen ja estää ohjaimen asennuksen. Valitse [Driver Signing Options]-valintaikkunan [What action do you want Windows to take?]-ruudusta vaihtoehto [Ignore] tai [Warn]. Jos valitset vaihtoehdon [Block], et voi asentaa tulostinohjainta.

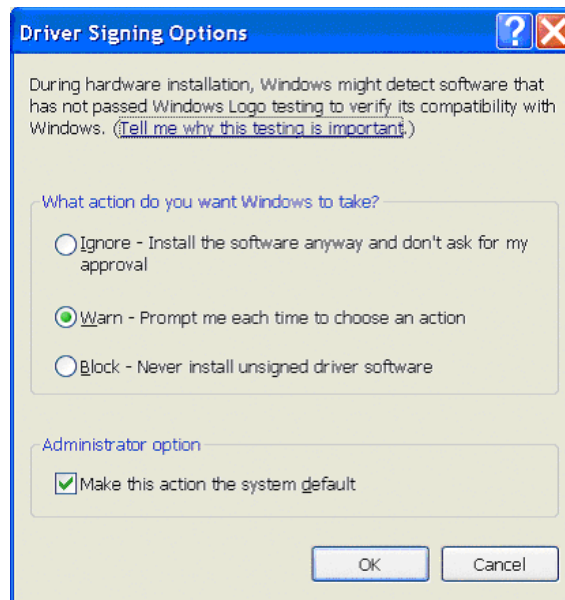

Avaa [Driver Signing Options]-valintaikkuna seuraavasti:

- 1 Valitse [Start]-valikosta [Control Panel].
- 2 Kaksoisnapsauta kohtaa [System].  
Valintaikkuna [System Properties] tulee näkyviin.
- 3 Napsauta välilehteä [Hardware].
- 4 Napsauta painiketta [Driver Signing].

Kaikki tämän oppaan ohjeet perustuvat siihen oletukseen, että tässä valintaikkunassa on valittu asetus [Warn].

## Asennus Windows XP:hen

- 1 Kytke tietokoneeseen se tulostin (vain yksi), jonka tulostinohjaimen haluat asentaa tietokoneeseen.
- 2 Kytke tulostimeen virta.
- 3 Käynnistä tietokone ja kirjaudu sisään järjestelmän pääkäyttäjänä tai pääkäyttäjryhmän jäsenenä.


Valintaikkuna [Found New Hardware Wizard] tulee näkyviin.






- Jos näkyviin tulee sama [Found New Hardware Wizard]-valintaikkuna kuin vaiheessa **3**, siirry vaiheeseen **4**.
- Jos näkyviin tulee eri [Found New Hardware Wizard]-valintaikkuna kuin vaiheessa **3**, siirry vaiheeseen **5**.
- Jos [Found New Hardware Wizard]-valintaikkuna ei tule näkyviin, suorita alla kuvatut vaiheet, kun asennettava tulostin on käynnissä ja kytkettynä tietokoneeseen. (Muita USB-tulostimia tai aiemmin asennettuja tulostimia ei tällöin saa olla kytkettynä.)
  - ① Valitse [Start]-valikosta [Control Panel].
  - ② Kaksoisnapsauta kohtaa [System]. Valintaikkuna [System Properties] tulee näkyviin.
  - ③ Napsauta välilehteä [Hardware].
  - ④ Napsauta [Device Manager]-painiketta. [Device Manager]-ikkuna avautuu.
  - ⑤ Napsauta [Universal Serial Bus controllers]-säätimien vasemmalla puolella olevaa [+] -painiketta.
  - ⑥ Napsauta kohtaa [USB Printing support] hiiren kakkospainikkeella ja avaa [Properties]. Varmista, että kytkettynä olevan tulostimen mallinimi on valittuna kohdassa [Location], ja valitse sitten [Action]-valikosta [Uninstall].
  - ⑦ Käynnistä tietokone uudelleen. Kun Windows XP on käynnistynyt, valintaikkuna [Found New Hardware Wizard] tulee näkyviin.

- 4** Valitse [No, not this time] ja napsauta sitten [Next]-painiketta.

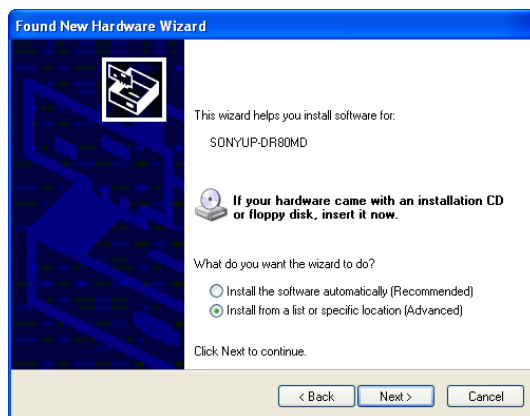

- 5** Valitse [Install from a list or specific location (Advanced)] ja napsauta sitten [Next]-painiketta.

Seuraava ruutu tulee näkyviin.

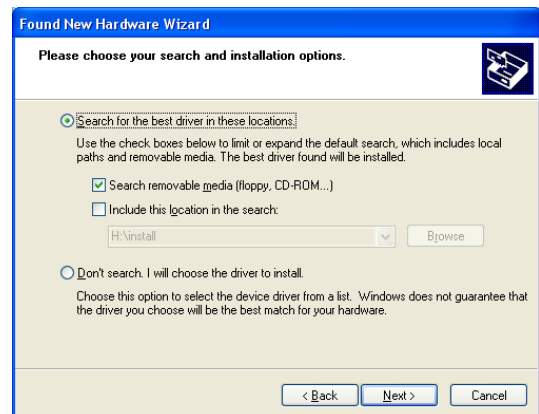

- 6** Määritä tulostinohjaimen asennustiedoston sijainti. Toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, käytätkö mukana toimitettua CD-levyä vai et (jos olet ladannut ohjaimen verkosta).

### Toimenpiteet mukana toimitettua CD-levyä käytettäessä

Valitse [Search for the best driver in these locations] ja [Search removable media (floppy, CD-ROM...)] ja aseta sitten mukana toimitettu CD-levy CD-ROM-asemaan.

### Toimenpiteet ilman mukana toimitettua CD-levyä

Valitse [Search for the best driver in these locations] ja [Include this location in the search] ja avaa sitten [Browse For Folder]-valintaikkuna napsauttamalla [Browse]-painiketta. Määritä kansio, johon lataamasi asennustiedosto on purettu, ja sulje sitten [Browse For Folder]-valintaikkuna napsauttamalla [OK]-painiketta.

- 7** Napsauta [Next]-painiketta.

Seuraava valintaikkuna tulee näkyviin.



- 8 Napsauta [Continue Anyway]-painiketta.

Tiedostojen kopioinnin jälkeen näkyviin tulee seuraava ruutu.



- 9 Napsauta [Finish]-painiketta.

Tulostinohjain on asennettu Windows XP -järjestelmään.

- 10 Käynnistä tietokone uudelleen.

## Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Windows XP:ssä


Tässä osiossa kuvataan, miten tulostinohjain poistetaan.

### Huomautus

Asennuksen poistoa aloitettaessa tulostin ei saa olla kytkettynä tietokoneeseen. Jos [Found New Hardware Wizard]-valintaikkuna tulee näkyviin, irrota tietokoneen ja tulostimen yhdistävä kaapeli, sulje valintaikkuna napsauttamalla kaikkien ruutujen [Cancel]-painiketta ja aloita asennuksen poisto uudelleen.


- 1 Katkaise tulostimen virta ja irrota tietokoneen ja tulostimen välinen kaapeli.
- 2 Käynnistä tietokone ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojar ryhmän jäsenenä.

- 3 Napsauta [Start]-painiketta, valitse [Control Panel] ja valitse sitten [Add or Remove Programs].

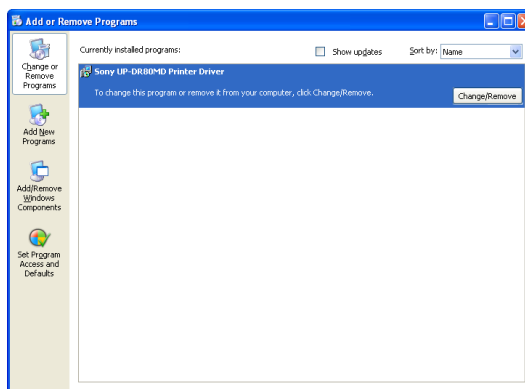

- 4 Valitse tulostinohjain [Uninstall or change a program]-luettelosta ja napsauta sitten [Uninstall/Change]-painiketta.

Seuraava ruutu tulee näkyviin.

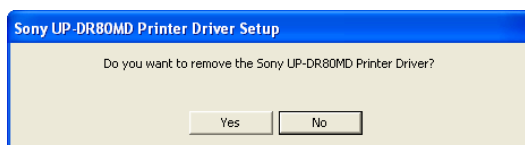

- 5 Valitse [Yes].

Kun tulostinohjaimen asennus on poistettu, näkyviin tulee seuraava valintaikkuna.



- 6 Valitse [Yes].

Tietokone käynnistyy uudelleen.

Tulostinohjaimen asennus on poistettu.

# Tulostinohjaimen asentaminen Windows 2000:een

## Ennen asennusta

### Tietoja versiopäivityksistä

Jos päivität tulostinohjaimen, poista edellinen tulostinohjain ennen asennuksen aloittamista. Katso lisätietoja tulostinohjaimen poistamisesta tämän oppaan kohdasta ”Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Windows 2000:ssä”.

Jos asennus ei onnistu tai se peruutetaan, käynnistä tietokone uudelleen, ennen kuin yrität asennusta uudelleen.

### Huomautus

Muista käynnistää tietokone uudelleen tulostinohjaimen asennuksen tai asennuksen poiston jälkeen. Jollet käynnistä tietokonetta uudelleen, se saattaa toimia epävakaasti.


### Tietoja ohjaimien allekirjoitusasetuksista

Tämä tulostinohjain ei ole läpäissyt Windows-logon käytölle asetettuja testejä. Jos asennuksen aikana näkyviin tulee virheilmoitus, asennus ei ehkä ole mahdollista.

Varmista, että olet valinnut [Driver Signing Options]-ikkunan [File signature verification]-kohdassa vaihtoehdon [Ignore] tai [Warn]. Et voi asentaa tulostinohjainta, jos [Block] on valittuna.

Avaa [Driver Signing Options]-valintaikkuna seuraavasti:

- 1 Siirrä hiiren osoitin [Start]-valikon [Settings]-kohtaan ja napsauta sitten kohtaa [Control Panel].
- 2 Kaksoisnapsauta [System]-painiketta. Valintaikkuna [System Properties] tulee näkyviin.
- 3 Napsauta välilehteä [Hardware].
- 4 Napsauta painiketta [Driver Signing].

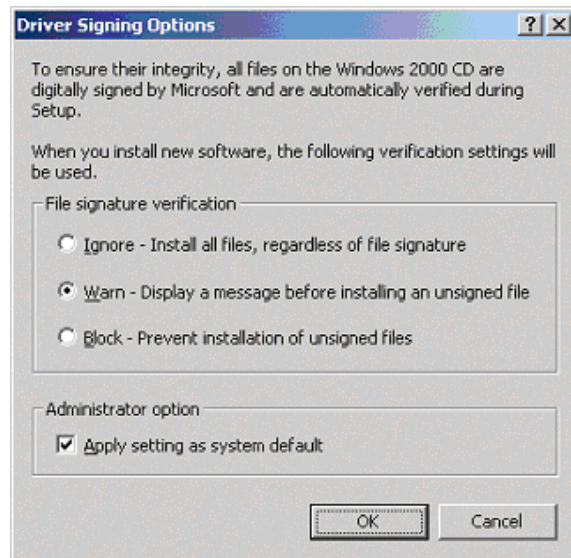


Kaikki tämän oppaan ohjeet perustuvat siihen oletukseen, että tässä valintaikkunassa on valittu asetus [Warn].

## Asennus Windows 2000:een

- 1 Kytke tietokoneeseen se tulostin (vain yksi), jonka tulostinohjaimen haluat asentaa tietokoneeseen.
- 2 Kytke tulostimeen virta.
- 3 Käynnistä tietokone ja kirjaudu sisään järjestelmän pääkäyttäjänä tai pääkäyttäjryhmän jäsenenä.

Kun Windows 2000 on käynnistynyt, valintaikkuna [Found New Hardware Wizard] tulee näkyviin.

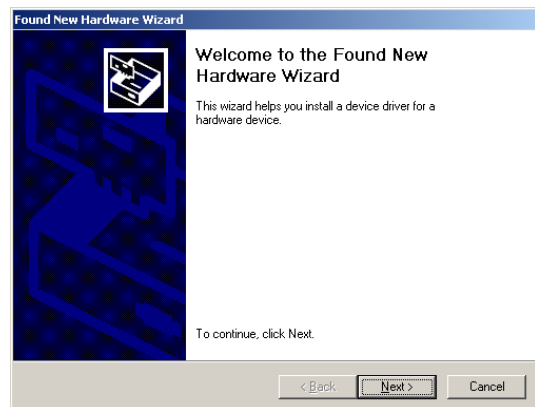


### Jos valintaikkuna [Found New Hardware Wizard] ei tule näkyviin

Suorita seuraavat toimenpiteet, kun asennettava tulostin on käynnissä ja kytkettynä tietokoneeseen. (Muita USB-tulostimia tai aiemmin asennettuja tulostimia ei tällöin saa olla kytkettynä.)

- ① Siirrä hiiren osoitin [Start]-valikon [Settings]-kohtaan ja napsauta sitten kohtaa [Control Panel].
- ② Kaksoisnapsauta kohtaa [System].  
Valintaikkuna [System Properties] tulee näkyviin.
- ③ Napsauta välilehteä [Hardware].
- ④ Napsauta [Device Manager]-painiketta.  
[Device Manager]-ikkuna avautuu.
- ⑤ Napsauta [Universal Serial Bus controllers]-säätimien vasemmalla puolella olevaa [+] -painiketta.
- ⑥ Napsauta kohtaa [USB Printing support] hiiren kakkospainikkeella ja avaa [Properties].  
Varmista, että kytkettynä olevan tulostimen mallinimi on valittuna kohdassa [Location], ja valitse sitten [Action]-valikosta [Uninstall].
- ⑦ Käynnistä tietokone uudelleen.  
Kun Windows 2000 on käynnistynyt, valintaikkuna [Found New Hardware Wizard] tulee näkyviin.


#### 4 Napsauta [Next]-painiketta.

Seuraava ruutu tulee näkyviin.

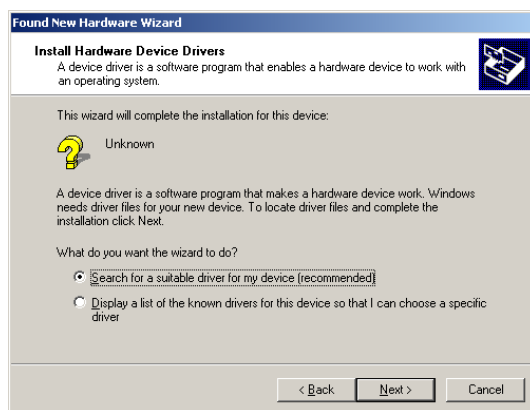

#### 5 Valitse [Search for a suitable driver...] ja napsauta sitten [Next]-painiketta.

Seuraava ruutu tulee näkyviin.

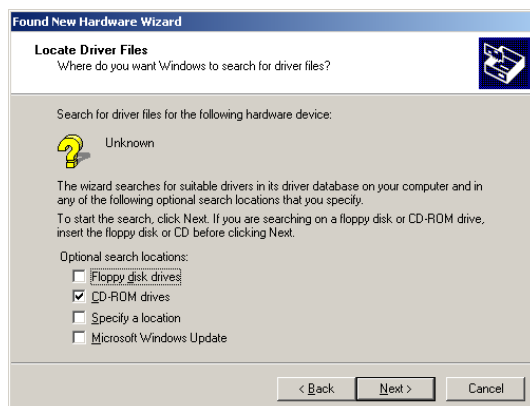


## Toimenpiteet mukana toimitettua CD-levyä käytettäessä


#### 6 Laita CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.

#### 7 Valitse [CD-ROM drives]-valintaruutu ja napsauta sitten [Next]-painiketta.

Seuraava ruutu tulee näkyviin.

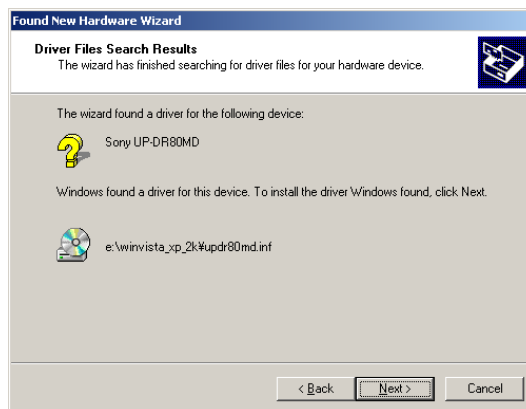


#### 8 Napsauta [Next]-painiketta.

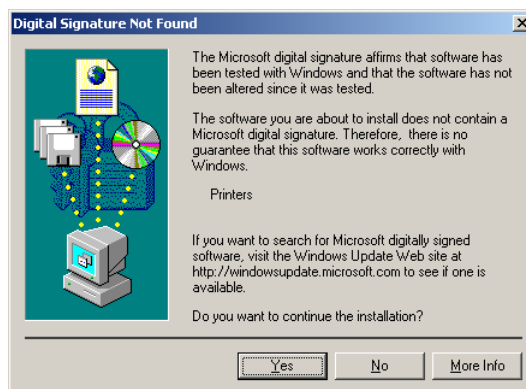

Jos valintaikkuna [Digital Signature Not Found] tulee näkyviin, napsauta [Yes]-painiketta.

Kun tiedostot on kopioitu, näkymä muuttuu seuraavasti.

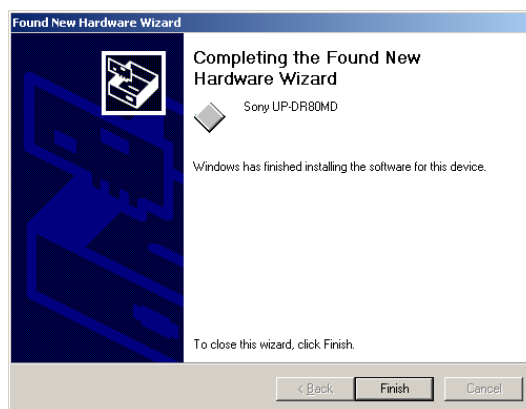

**9** Napsauta [Finish]-painiketta.


Tulostinohjain on asennettu Windows 2000 -järjestelmään.

**10** Käynnistä tietokone uudelleen.

## Toimenpiteet ilman mukana toimitettua CD-levyä

**6** Valitse [Specify a location] ja napsauta sitten [Next]-painiketta.


Näkymä muuttuu seuraavasti.

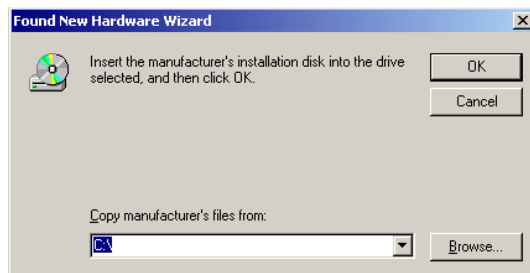

**7** Avaa [Locate File]-valintaikkuna napsauttamalla [Browse]-painiketta. Määritä kansio, johon lataamasi asennustiedosto on purettu, ja sulje sitten [Locate File]-valintaikkuna napsauttamalla [Open]-painiketta.

**8** Napsauta [OK]-painiketta.

Näkymä muuttuu seuraavasti.

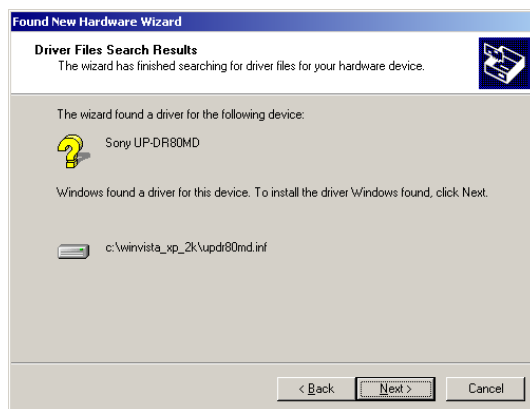

**9** Napsauta [Next]-painiketta.



Jos valintaikkuna [Digital Signature Not Found] tulee näkyviin, napsauta [Yes]-painiketta.

Kun tiedostot on kopioitu, näkymä muuttuu seuraavasti.



**10** Napsauta [Finish]-painiketta.

Tulostinohjain on asennettu Windows 2000 -järjestelmään.

**11** Käynnistä tietokone uudelleen.

### Huomautus

Jos vaiheessa **7** valitaan [Cancel] tai vaiheessa **8** valitaan [No], valintaikkuna [Found New Hardware Wizard] ei ehkä tule näkyviin seuraavan asennuksen yhteydessä. Toimi tässä tapauksessa vaiheen Step **3** kohdan ”Jos valintaikkuna [Found New Hardware Wizard] ei tule näkyviin” ohjeen mukaan.


## Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Windows 2000:ssa

Tässä osiossa kuvataan, miten tulostinohjain poistetaan.

### Huomautus


Asennuksen poistoa aloitettaessa tulostin ei saa olla kytkettynä tietokoneeseen. Jos [Found New Hardware Wizard]-valintaikkuna tulee näkyviin, irrota tietokoneen ja tulostimen yhdistävä kaapeli, sulje valintaikkuna napsauttamalla kaikkien ruutujen [Cancel]-painiketta ja aloita asennuksen poisto uudelleen.

- 1 Katkaise tulostimen virta ja irrota tietokoneen ja tulostimen välinen kaapeli.
- 2 Käynnistä tietokone ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojatryhmän jäsenenä.
- 3 Siirrä hiiren osoitin [Start]-valikon [Settings]-kohtaan ja napsauta sitten kohtaa [Control Panel]. Kaksoisnapsauta sitten kohtaa [Add/Remove Programs].

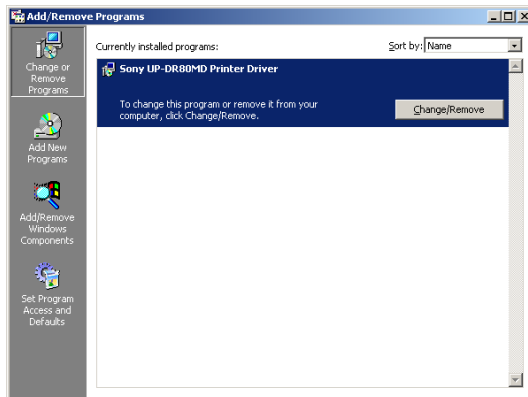


- 4 Valitse tulostinohjain [Currently installed programs]-luettelosta ja napsauta sitten [Change/Remove]-painiketta.

Seuraava valintaikkuna tulee näkyviin.

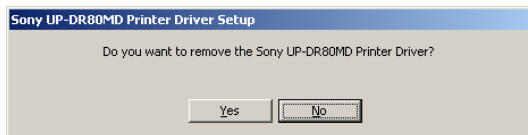

- 5 Valitse [Yes].

Kun tulostinohjaimen asennus on poistettu, näkyviin tulee seuraava valintaikkuna.

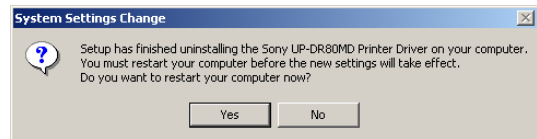

- 6 Valitse [Yes].

Tietokone käynnistyy uudelleen.

Tulostinohjaimen asennus on poistettu.