

Printer Driver

Installationsvejledning

I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista, Windows XP, and Windows 2000.

Før softwaren tages i brug

Læs "ReadMe"-filen, før du tager printerdriveren i brug.

Indholdsfortegnelse

Krav til driftsmiljøet	3
Om dette dokument	3
Installation af printerdriveren i	
Windows Vista	4
Før installationen	4
Installation i Windows Vista	4
Afinstallation af printerdriveren i	
Windows Vista	7
Installation af printerdriveren i	
Windows XP	8
Før installationen	8
Installation i Windows XP	8
Afinstallation af printerdriveren i	
Windows XP	10
Installation af printerdriveren i	
Windows 2000	11
Før installationen	11
Installation i Windows 2000	11
Afinstallation af printerdriveren i	
Windows 2000	14

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Andre firmanavne og produktnavne, som er nævnt i denne vejledning, er også varemærker og registrerede varemærker.

Krav til driftsmiljøet

Din computer skal køre et af følgende operativsystemer for kunne bruge printerdriveren.

- Microsoft Windows Vista (64-bit versionen understøttes ikke)
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition (64-bit versionen understøttes ikke)
- Microsoft Windows 2000 Professional

Om USB 2.0

- Printeren overholder USB 2.0-specifikationerne.
- USB 2.0 er fuldt bagudkompatibel med USB 1.1.
- USB 2.0 understøtter normal fuldhastigheds- (lav) og Hi-Speed-drift.
- I et USB 1.1-miljø er forbindelse og drift ved fuld hastighed mulig. Følgende krav skal overholdes, for at Hi-Speed-drift er mulig.
 - Computer
En computer, der understøtter Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)*
 - Operativsystem
Windows Vista, Windows XP Professional/Home Edition eller Windows 2000 Professional
 - USB 2.0-driver
En USB 2.0-enhedsdriver, der produceres af Microsoft Corporation (drift sammen med andre USB 2.0-drivere garanteres ikke.)
 - Certificeret USB 2.0-kabel

* Kompatibilitet med alle USB 2.0-enheder, USB 2.0-udvidelseskort eller andre udvidelseskort kan ikke garanteres.

Bemærk

Når printeren er tilsluttet og tændt, skal du sikre, at computeren ikke går i dvale- eller standbytilstand. Ellers kan korrekt drift ikke sikres.

Om dette dokument

Beskrivelsen af funktionerne i Kontrolpanel i dette dokument forudsætter, at Windows er i Classic View. Hvis du vil skifte til Classic View, skal du klikke på [Start], vælge [Control Panel] og klikke på [Switch to Classic View] i Control Panel Properties, der vises til venstre på skærmen.

De skærmmeddelelser, der vises i denne vejledning, forudsætter, at en UP-DR80MD -printer er tilsluttet. Hvis du bruger en anden model printer, skal du erstatte en eventuel forekomst af "UP-DR80MD" med modelnavnet på din printer, mens du læser skærmmeddelelserne i denne vejledning.

Installation af printerdriveren i Windows Vista


Før installationen


Om versionsopgraderinger

Hvis du opgraderer en printerdriver, skal du fjerne den eksisterende printerdriver, før du installerer den nye. Se afsnittet "Afinstallation af printerdriveren i Windows Vista" i denne vejledning for at få udførlige oplysninger om, hvordan du fjerner printerdriveren.

Hvis installationen mislykkes eller annulleres, skal du genstarte computeren, før du forsøger at installere driveren igen.

USB 2.0-tilslutning


Printeren overholder USB 2.0-specifikationerne. Hvis computeren eller USB-hubben ikke er kompatibel med USB 2.0, vises følgende meddelelse, når du tilslutter printerens. Klik på  for at lukke meddelelsen.

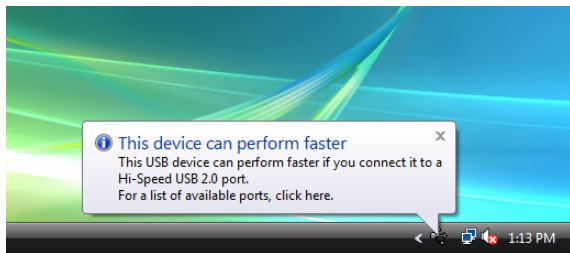

Installation i Windows Vista

- 1 Tilslut den printer (kun én), du vil installere driveren til, til computeren.
- 2 Tænd den tilsluttede printer.
- 3 Tænd computeren, og log på som systemadministrator eller som medlem af administratorgruppen.

Dialogboksen [Found New Hardware] åbnes.

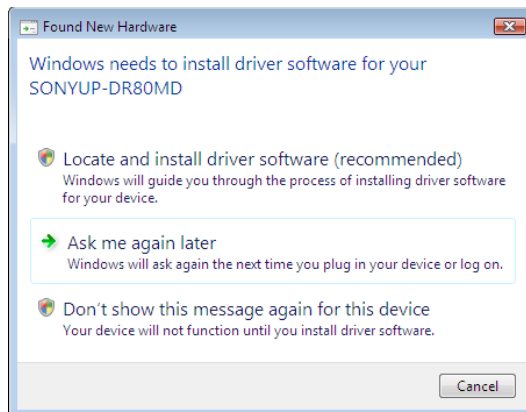


Hvis meddelelsen "Device driver software was not successfully installed" vises, og dialogboksen [Found New Hardware] ikke vises, skal du prøve at tage USB-kablet ud og tilslutte det igen. Hvis dialogboksen [Found New Hardware] stadig ikke vises, skal du udføre de trin, der beskrives nedenfor, mens den printer, printerdriveren skal installeres til, er tændt og tilsluttet computeren. (Andre USB-printere eller tidligere installerede printere bør ikke være tilsluttet på dette tidspunkt.)


- ① Klik på [Start], og vælg [Control Panel].
- ② Dobbeltklik på [System].
- ③ Klik på [Device Manager].
Dialogboksen [User Account Control] åbnes.
- ④ Klik på [Continue].
Vinduet [Device Manager] åbnes.
- ⑤ Klik på [+] til venstre for [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Vælg [USB Printing support], og vælg derefter [Uninstall] i menuen [Action].
- ⑦ Genstart computeren.
Dialogboksen [Found New Hardware] åbnes.

- 4 Klik på [Locate and install driver software (recommended)].


Følgende dialogboks vises.

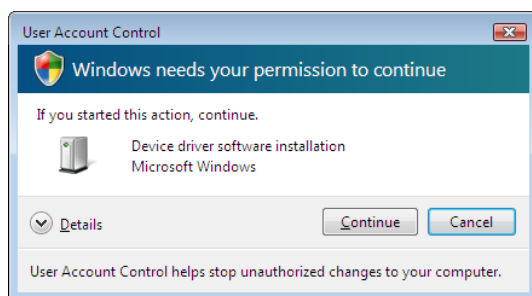

- 5 Klik på [Continue].
- 6 Klik på [Don't search online], hvis følgende dialogboks vises.

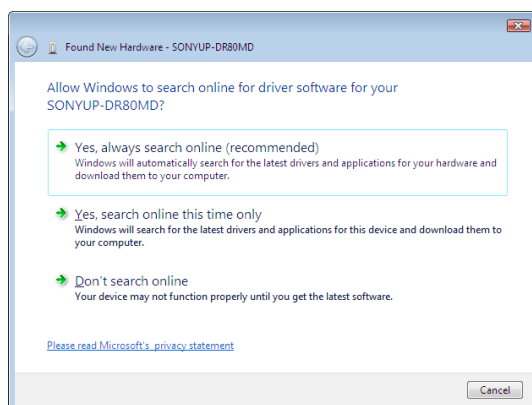

Skærbilledet ændres på følgende måde.

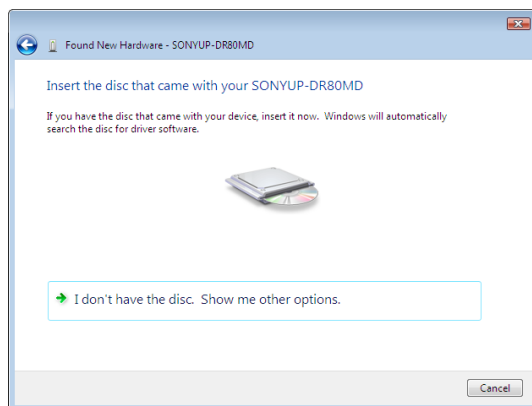


Herfra varierer fremgangsmåden, afhængigt af, om du bruger den medfølgende CD-ROM eller ej (hvis du har hentet driveren online).


Fremgangsmåde med den medfølgende CD-ROM

- 7 Indsæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet.

Skærbilledet ændres på følgende måde.

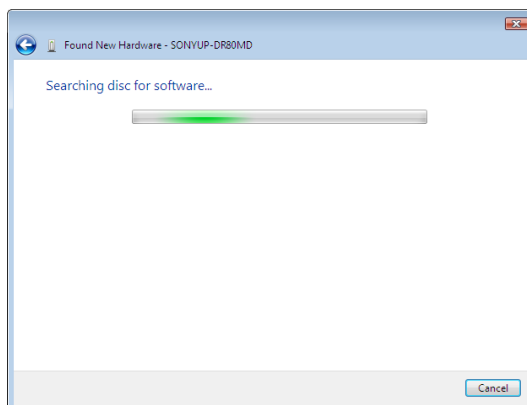


Når søgningen efter software er afsluttet, vises følgende dialogboks.

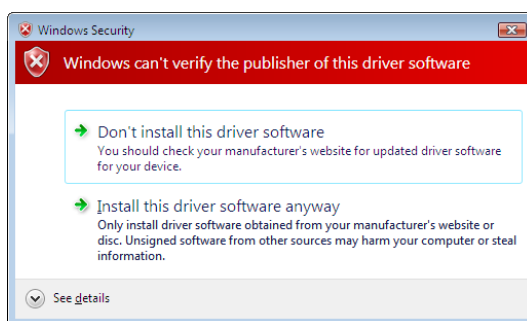


- 8 Klik på [Install this driver software anyway].

Dialogboksen lukkes, og dialogboksen [Found New Hardware] vises igen.

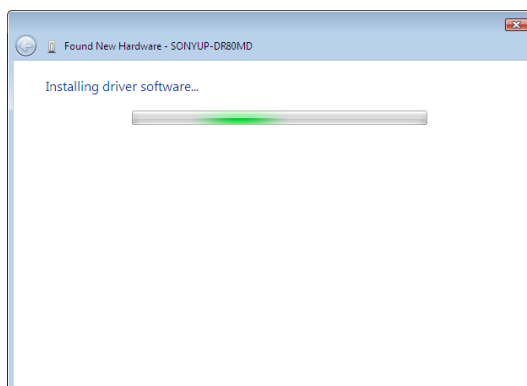

Når filerne er kopieret, ændres skærbilledet på følgende måde.

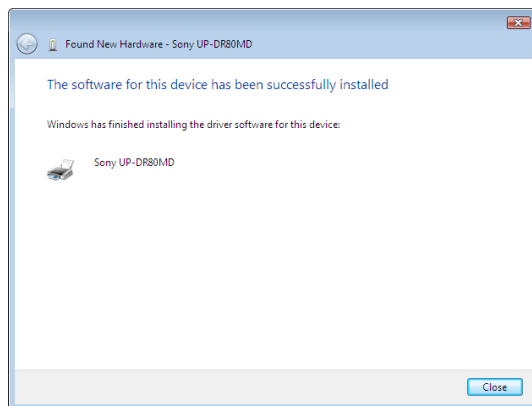


9 Klik på [Close].

Nu er printerdriveren installeret.

Fremgangsmåde uden den medfølgende CD-ROM


7 Klik på [I don't have the disc. Show me other options].

Skærbilledet ændres på følgende måde.

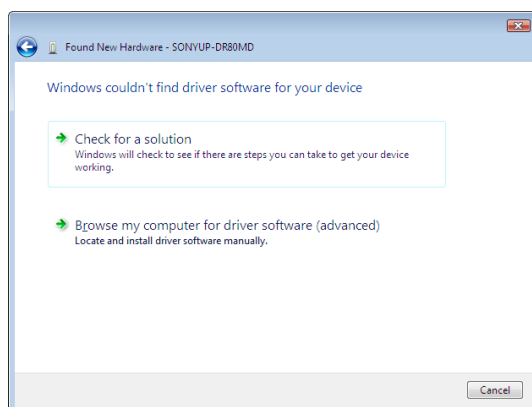

8 Klik på [Browse my computer for driver software (advanced)].


Skærbilledet ændres på følgende måde.

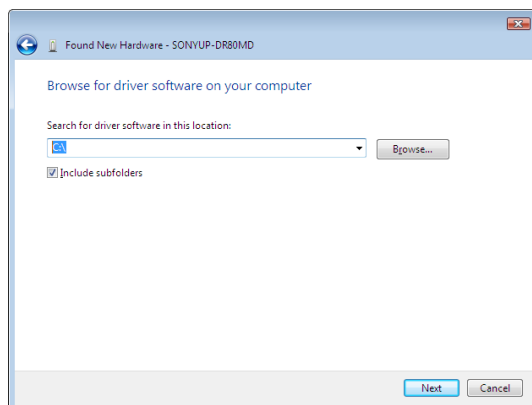

9 Klik på [Browse] for at åbne dialogboksen [Browse For Folder]. Angiv den mappe, den hentede installationsfil blev pakket ud i, og klik derefter på [OK] for at lukke dialogboksen [Browse For Folder].


10 Klik på [Next].

Følgende dialogboks vises.

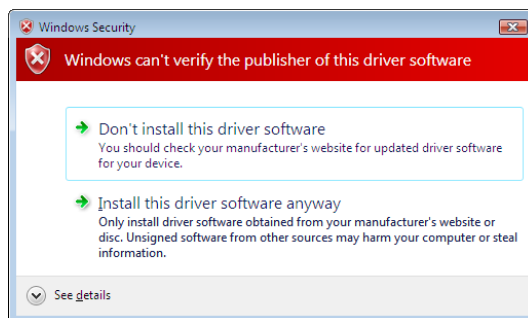


11 Klik på [Install this driver software anyway].

Dialogboksen lukkes, og dialogboksen [Found New Hardware] vises igen.

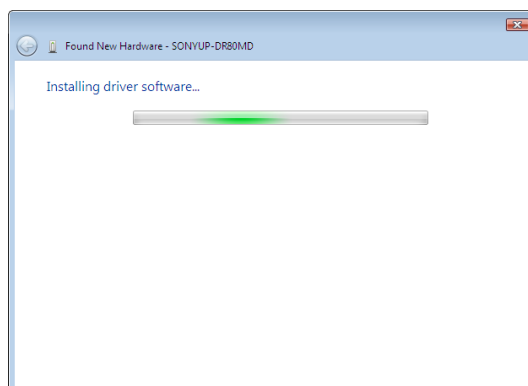

Når filerne er kopieret, ændres skærbilledet på følgende måde.

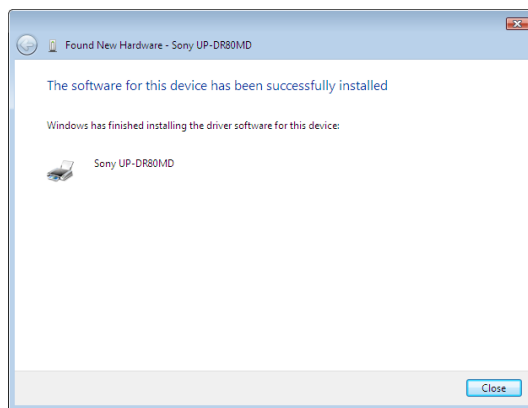

12 Klik på [Close].

Nu er printerdriveren installeret.


Afinstallation af printerdriveren i Windows Vista

I dette afsnit beskrives, hvordan du fjerner printerdriveren.


Bemærk

Når du starter afinstallationen, skal printeren ikke være tilsluttet computeren. Hvis dialogboksen [Found New Hardware] vises, skal du tage kablet mellem computeren og printeren ud, klikke på [Cancel] på alle skærbilleder for at lukke dialogboksen og derefter starte afinstallationen igen.


- 1 Sluk printeren, og tag kablet mellem computeren og printeren ud.
- 2 Tænd computeren, og log på som systemadministrator eller som medlem af administratorgruppen.
- 3 Klik på [Start], vælg [Control Panel], og vælg derefter [Programs and Features].

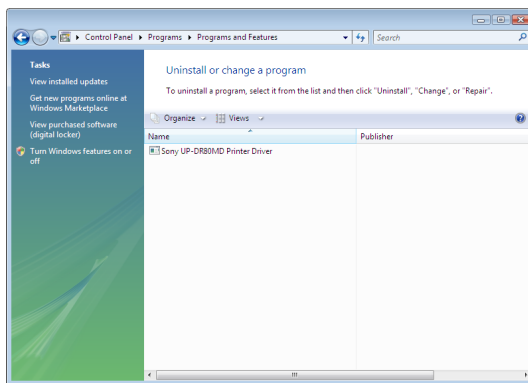

- 4 Vælg printerdriveren på listen [Uninstall or change a program], og klik derefter på [Uninstall/Change].

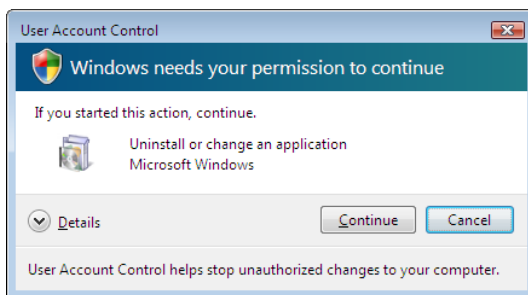


- 5 Klik på [Continue].

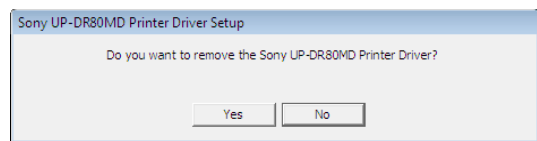

- 6 Klik på [Yes].

Følgende dialogboks vises, når printerdriveren er afinstalleret.

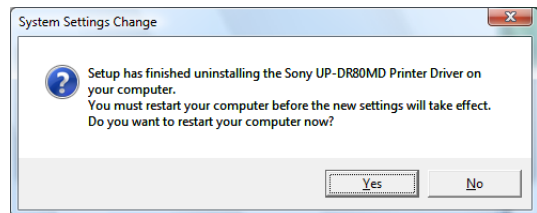

- 7 Klik på [Yes].

Computeren genstartes.

Nu er printerdriveren afinstalleret.

Installation af printerdriveren i Windows XP

Før installationen

Om versionsopgraderinger


Hvis du opgraderer en printerdriver, skal du fjerne den eksisterende printerdriver, før du installerer den nye. Se afsnittet "Afinstallation af printerdriveren i Windows XP" i denne vejledning for at få udførlige oplysninger om, hvordan du fjerner printerdriveren.


Hvis installationen mislykkes eller annulleres, skal du genstarte computeren, før du forsøger at installere driveren igen.

Bemærk

Sørg for at genstarte computeren, når du har installeret eller afinstalleret printerdriveren. Medmindre du genstarter, kan resultatet være ustabil funktion.

USB 2.0-tilslutning


Printeren er kompatibel med USB 2.0. Hvis computeren eller USB-hubben ikke er kompatibel med USB 2.0, vises følgende meddelelse, når du tilslutter printeren. Klik på  for at lukke meddelelsen.

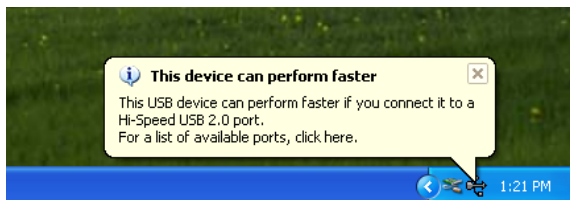

Om indstillinger for driverbekræftelse

Denne printerdriver har ikke bestået Windows Logo-kompatibilitetstesten. Derfor kan der blive vist en fejlmeddelelse under installationen, der forhindrer dig i at installere driveren.

I dialogboksen [Driver Signing Options] skal du vælge [Ignore] eller [Warn] i gruppeboksen [What action do you want Windows to take?]. Hvis du vælger [Block], kan du ikke installere printerdriveren.

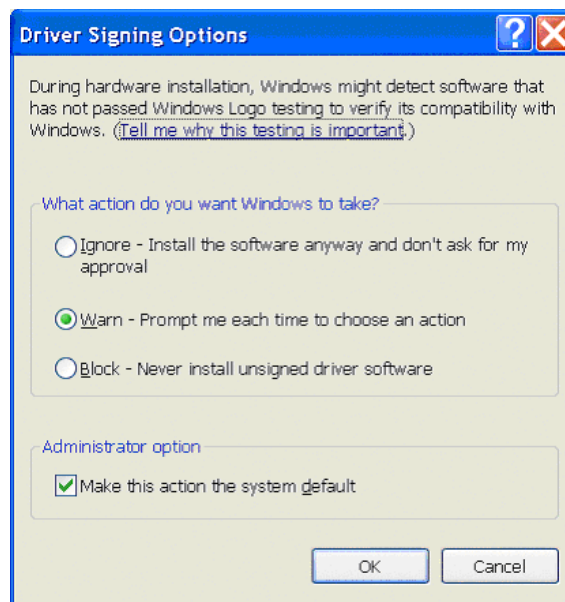

Åbn dialogboksen [Driver Signing Options] på følgende måde:

- 1 Klik på [Control Panel] i menuen [Start].
- 2 Dobbeltklik på [System].
Dialogboksen [System Properties] åbnes.
- 3 Klik på fanen [Hardware].
- 4 Klik på knappen [Driver Signing].

Alle forklaringer i denne vejledning gælder, når [Warn] er markeret i dialogboksen.

Installation i Windows XP

- 1 Tilslut den printer (kun én), du vil installere driveren til, til computeren.
- 2 Tænd den tilsluttede printer.
- 3 Tænd for computeren, og log på som systemadministrator eller som medlem af gruppen Administrators.


Dialogboksen [Found New Hardware Wizard] åbnes.



- Hvis dialogboksen [Found New Hardware Wizard] fra punkt **3** vises igen, skal du fortsætte til punkt **4**.
- Hvis der vises en anden dialogboks med [Found New Hardware Wizard] end den fra punkt **3**, skal du fortsætte til punkt **5**.
- Hvis dialogboksen [Found New Hardware Wizard] ikke vises, skal du udføre en af følgende handlinger, mens printeren, der skal installeres, fortsat er tændt og tilsluttet computeren. (Andre USB-printere eller tidligere installerede printere bør ikke være tilsluttet på dette tidspunkt.)


- 1 Klik på [Control Panel] i menuen [Start].
- 2 Dobbeltklik på [System].
Dialogboksen [System Properties] åbnes.
- 3 Klik på fanen [Hardware].
- 4 Klik på knappen [Device Manager].
Vinduet [Device Manager] åbnes.
- 5 Klik på [+] til venstre for [Universal Serial Bus controllers].
- 6 Højreklik på [USB Printing support], og åbn [Properties]. Kontroller, at modelnavnet på den aktuelt tilsluttede printer er valgt som [Location], og vælg derefter [Uninstall] i menuen [Action].
- 7 Genstart computeren.
Når Windows XP starter, åbnes dialogboksen [Found New Hardware Wizard].

- 4 Klik på [No, not this time], og klik på [Next].

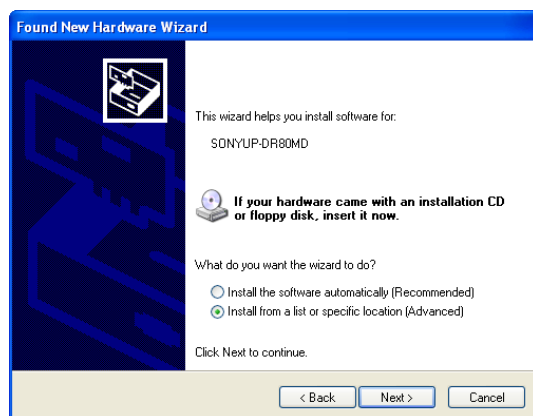

- 5 Vælg [Install from a list or specific location (Advanced)], og klik derefter på knappen [Next].

Følgende skærbillede vises.

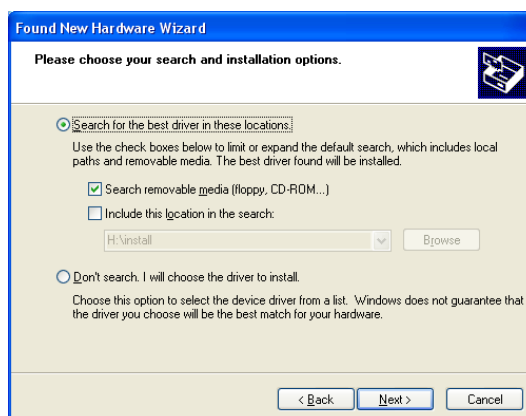

- 6 Angiv placeringen af printerdriverens installationsfil.
Fremgangsmåden varierer, afhængigt af om du bruger den medfølgende CD-ROM eller ej (hvis du har hentet driveren online).

Fremgangsmåde med den medfølgende CD-ROM

Marker [Search for the best driver in these locations] og [Search removable media (floppy, CD-ROM...)], og isæt derefter den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet.

Fremgangsmåde uden den medfølgende CD-ROM

Marker [Search for the best driver in these locations] og [Include this location in the search], og klik derefter på [Browse] for at åbne dialogboksen [Browse For Folder]. Angiv den mappe, den hentede installationsfil blev pakket ud i, og klik derefter på [OK] for at lukke dialogboksen [Browse For Folder].

- 7 Klik på knappen [Next].

Følgende dialogboks åbnes.



- 8 Klik på knappen [Continue Anyway].

Når filerne er kopieret, åbnes følgende skærbillede.



- 9 Klik på knappen [Finish].

Derved fuldføres installationen af printerdriveren med Windows XP.

- 10 Genstart computeren.

Afinstallation af printerdriveren i Windows XP


I dette afsnit beskrives, hvordan du fjerner printerdriveren.

Bemærk

Når du starter afinstallationen, skal printeren ikke være tilsluttet computeren. Hvis dialogboksen [Found New Hardware Wizard] vises, skal du tage kablet mellem computeren og printeren ud, klikke på [Cancel] på alle skærbilleder for at lukke dialogboksen og derefter starte afinstallationen igen.


- 1 Sluk printeren, og tag kablet mellem computeren og printeren ud.
- 2 Tænd computeren, og log på som systemadministrator eller som medlem af administratorgruppen.

- 3 Klik på [Start], vælg [Control Panel], og vælg derefter [Add or Remove Programs].

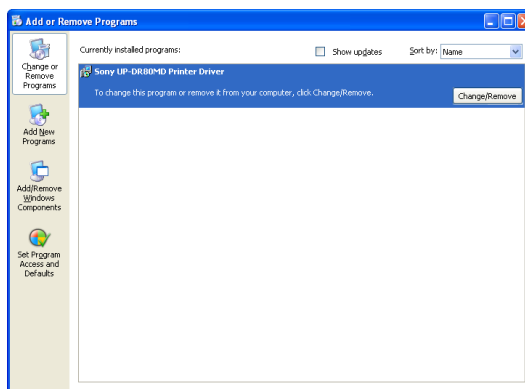

- 4 Vælg printerdriveren på listen [Uninstall or change a program], og klik derefter på [Uninstall/Change].

Følgende skærbillede vises.

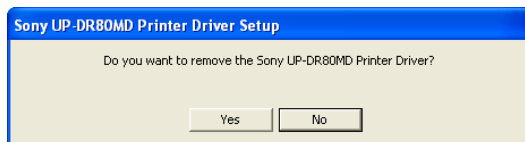

- 5 Klik på [Yes].

Følgende dialogboks vises, når printerdriveren er afinstalleret.



- 6 Klik på [Yes].

Computeren genstartes.

Nu er printerdriveren afinstalleret.

Installation af printerdriveren i Windows 2000

Før installationen

Om versionsopgraderinger

Hvis du opgraderer en printerdriver, skal du fjerne den eksisterende printerdriver, før du installerer den nye. Se afsnittet "Afinstallation af printerdriveren i Windows 2000" i denne vejledning for at få udførlige oplysninger om, hvordan du fjerner printerdriveren.

Hvis installationen mislykkes eller annulleres, skal du genstarte computeren, før du forsøger at installere driveren igen.

Bemærk

Sørg for at genstarte computeren, når du har installeret eller afinstalleret printerdriveren. Medmindre du genstarter, kan resultatet være ustabil funktion.


Om indstillinger for driverbekræftelse

Denne printerdriver har ikke bestået Windows Logo-kompatibilitetstesten, og derfor kan det muligvis ikke lade sig gøre at installere printerdriveren, hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen.

Sørg for at markere [Ignore] eller [Warn] under [File signature verification] i dialogboksen [Driver Signing Options]. Du kan ikke installere -printerdriveren, hvis [Block] er valgt.

Åbn dialogboksen [Driver Signing Options] på følgende måde:

- 1 Vælg [Settings] i menuen [Start], og klik derefter på [Control Panel].
- 2 Dobbeltklik på knappen [System]. Dialogboksen [System Properties] åbnes.
- 3 Klik på fanen [Hardware].
- 4 Klik på knappen [Driver Signing].

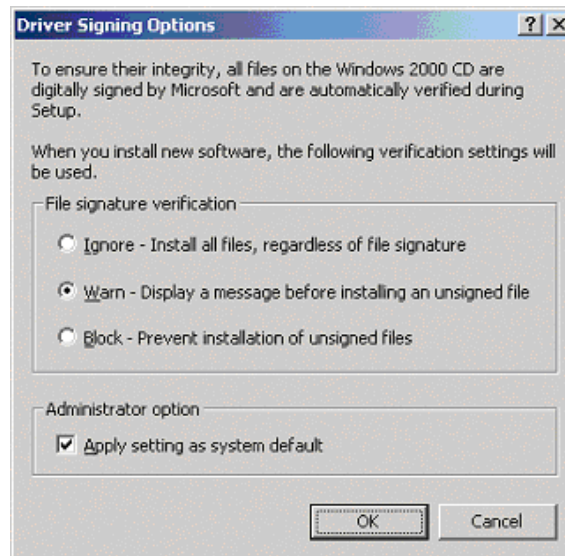


Alle forklaringer i denne vejledning gælder, når [Warn] er markeret i dialogboksen.

Installation i Windows 2000

- 1 Tilslut den printer (kun én), du vil installere driveren til, til computeren.
- 2 Tænd den tilsluttede printer.
- 3 Tænd for computeren, og log på som systemadministrator eller som medlem af gruppen Administrators.

Når Windows 2000 er startet, åbnes dialogboksen [Found New Hardware Wizard].

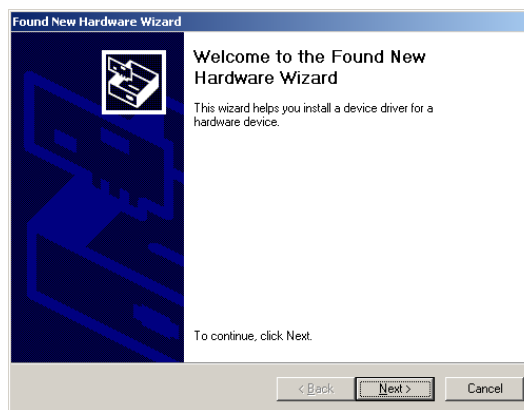

Hvis dialogboksen [Found New Hardware Wizard] ikke vises

Udfør følgende handlinger, mens den printer, der skal installeres, fortsat er tændt og tilsluttet computeren. (Andre USB-printere eller tidligere installerede printere bør ikke være tilsluttet på dette tidspunkt.)

- ① Vælg [Settings] i menuen [Start], og klik derefter på [Control Panel].
- ② Dobbeltklik på [System]. Dialogboksen [System Properties] åbnes.
- ③ Klik på fanen [Hardware].
- ④ Klik på knappen [Device Manager]. Vinduet [Device Manager] åbnes.
- ⑤ Klik på [+] til venstre for [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Højreklik på [USB Printing support], og åbn [Properties]. Kontroller, at modelnavnet på den aktuelt tilsluttede printer er valgt som [Location], og vælg derefter [Uninstall] i menuen [Action].
- ⑦ Genstart computeren. Når Windows 2000 er startet, åbnes dialogboksen [Found New Hardware Wizard].

4 Klik på knappen [Next].

Følgende skærbillede vises.



5 Vælg [Search for a suitable driver ...], og klik derefter på knappen [Next].


Følgende skærbillede vises.




Fremgangsmåde med den medfølgende CD-ROM

- 6 Indsæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet.
- 7 Marker afkrydsningsfeltet [CD-ROM drives], og klik derefter på knappen [Next].

Følgende skærbillede vises.

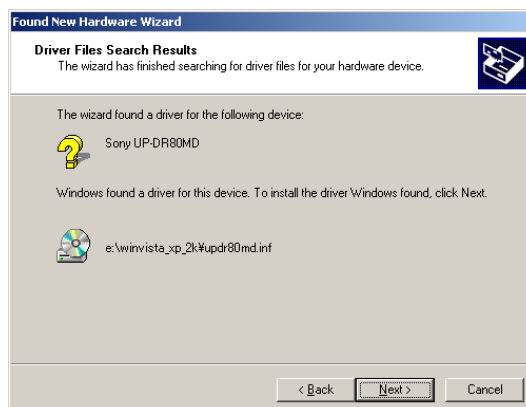


8 Klik på knappen [Next].

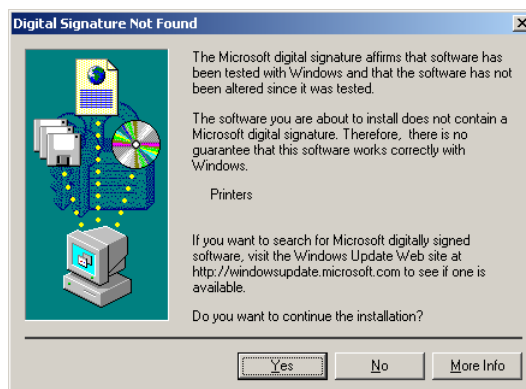

Hvis dialogboksen [Digital Signature Not Found] åbnes, skal du klikke på knappen [Yes].

Når filerne er kopieret, ændres skærbilledet på følgende måde.

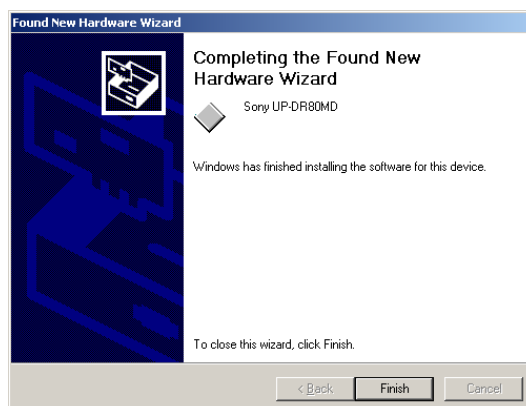

- 9 Klik på knappen [Finish].

Derved fuldføres installationen af printerdriveren med Windows 2000.

- 10 Genstart computeren.

Fremgangsmåde uden den medfølgende CD-ROM

- 6 Vælg [Specify a location], og klik derefter på knappen [Next].


Skærbilledet ændres på følgende måde.




- 7 Klik på knappen [Browse] for at åbne dialogboksen [Locate File]. Angiv den mappe, hvori den hentede installationsfil blev pakket ud, og klik derefter på knappen [Open] for at lukke dialogboksen [Locate File].

- 8 Klik på knappen [OK].

Skærbilledet ændres på følgende måde.

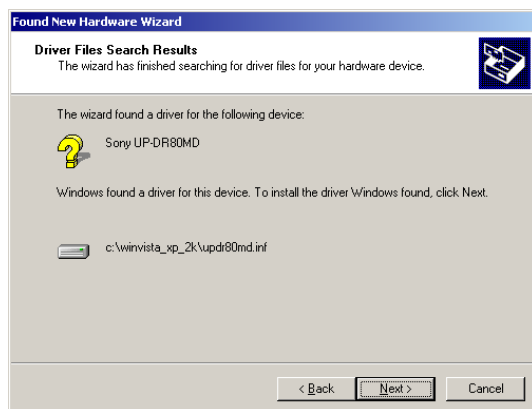


- 9 Klik på knappen [Next].

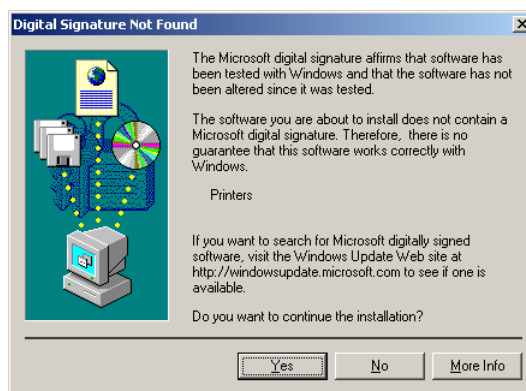

Hvis dialogboksen [Digital Signature Not Found] åbnes, skal du klikke på knappen [Yes].

Når filerne er kopieret, ændres skærbilledet på følgende måde.

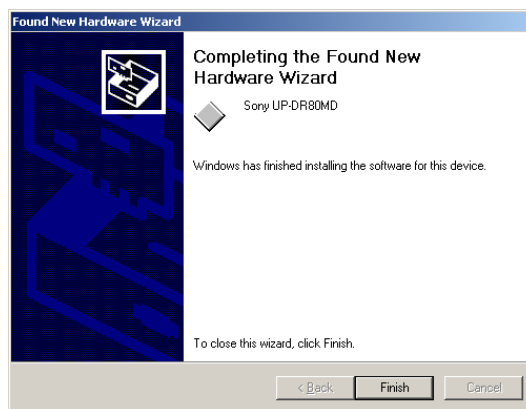

- 10 Klik på knappen [Finish].

Derved fuldføres installationen af printerdriveren med Windows 2000.

- 11 Genstart computeren.

Bemærk

Hvis [Cancel] i punkt 7 eller [No] i punkt 8 blev valgt, vises dialogboksen [Found New Hardware Wizard] muligvis ikke under næste installation. Hvis det er tilfældet, skal du benytte fremgangsmåden i "Hvis dialogboksen [Found New Hardware Wizard] ikke vises" i trin 3.


Afinstallation af printerdriveren i Windows 2000

I dette afsnit beskrives, hvordan du fjerner printerdriveren.

Bemærk


Når du starter afinstallationen, skal printeren ikke være tilsluttet computeren. Hvis dialogboksen [Found New Hardware Wizard] vises, skal du tage kablet mellem computeren og printeren ud, klikke på [Cancel] på alle skærbilleder for at lukke dialogboksen og derefter starte afinstallationen igen.

- 1 Sluk printeren, og tag kablet mellem computeren og printeren ud.
- 2 Tænd computeren, og log på som systemadministrator eller som medlem af administratorgruppen.
- 3 Klik på [Start], peg på [Settings], og klik derefter på [Control Panel]. Dobbeltklik derefter på [Add/Remove Programs].

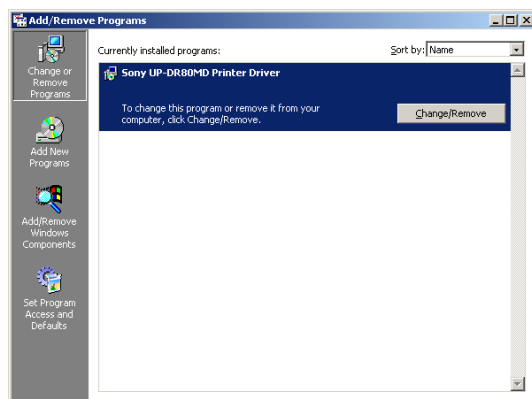

- 4 Vælg printerdriveren på listen [Currently installed programs], og klik derefter på [Change/Remove].

Følgende dialogboks vises.

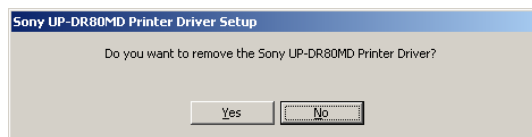

- 5 Klik på [Yes].

Følgende dialogboks vises, når printerdriveren er afinstalleret.



- 6 Klik på [Yes].

Computeren genstartes.

Nu er printerdriveren afinstalleret.