

# *Printer Driver*

---

## Guide d'installation

Ce guide décrit l'installation du pilote d'imprimante pour Windows Vista, Windows XP et Windows 2000.

### **Avant d'utiliser ce logiciel**

Avant d'utiliser le pilote d'imprimante, assurez-vous de lire le fichier « ReadMe ».

---

# Table des matières

<b>Conditions nécessaires pour l'opération .....</b>	<b>3</b>
<b>A propos de ce document .....</b>	<b>3</b>
<b>Installation du pilote d'imprimante dans</b>	
<b>Windows Vista .....</b>	<b>4</b>
Avant l'installation .....	4
Installation dans Windows Vista .....	4
Désinstallation du pilote d'imprimante dans	
Windows Vista .....	7
<b>Installation du pilote d'imprimante dans</b>	
<b>Windows XP .....</b>	<b>8</b>
Avant l'installation .....	8
Installation dans Windows XP .....	8
Désinstallation du pilote d'imprimante sous	
Windows XP .....	10
<b>Installation du pilote d'imprimante sous</b>	
<b>Windows 2000 .....</b>	<b>11</b>
Avant l'installation .....	11
Installation dans Windows 2000 .....	11
Désinstallation du pilote d'imprimante sous	
Windows 2000 .....	14

Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation. Les autres noms de société et de produit qui apparaissent dans ce guide sont également des marques commerciales ou des marques commerciales déposées.

# Conditions nécessaires pour l'opération

Pour l'utilisation du pilote d'imprimante, votre ordinateur doit répondre aux exigences suivantes:

- Microsoft Windows Vista (Edition 64 bits non compatible)
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition (Edition 64 bits non compatible)
- Microsoft Windows 2000 Professional

## A propos de USB 2.0

- L'imprimante est conforme aux spécifications USB 2.0.
- USB 2.0 est tout entièrement compatible avec USB 1.1.
- USB 2.0 prend en charge les opérations à pleine (faible) vitesse et à grande vitesse.
- La connexion et l'opération à pleine vitesse sont possibles dans un environnement USB 1.1. Pour l'opération à grande vitesse, les conditions suivantes doivent être remplies.
  - Ordinateur  
Ordinateur prenant en charge USB à grande vitesse (compatible USB 2.0)\*
  - Le système d'exploitation  
Windows Vista, Windows XP Professional/Home Edition ou Windows 2000 Professional
  - Pilote USB 2.0  
Pilote pour périphérique USB 2.0 produit par Microsoft Corporation (Le fonctionnement avec d'autres pilotes USB 2.0 n'est pas garantie.)
  - Câble agréé USB 2.0

\* La compatibilité avec tous les périphériques USB 2.0, cartes d'extension USB 2.0 ou cartes d'extension n'est pas garantie.

### Remarque

Si l'imprimante est raccordée et sous tension, assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode de veille, d'attente (suspendu) ou en mode hibernation. Sinon, l'opération correcte n'est pas garantie.

# A propos de ce document

L'explication des opérations du panneau de configuration dans ce document implique l'utilisation de Windows avec l'affichage classique. Pour basculer vers l'affichage classique, cliquez sur [Start], sélectionnez [Control Panel] et cliquez sur [Switch to Classic View] dans les propriétés du panneau de configuration sur le côté gauche de l'écran.

Les messages d'écran indiqués dans ce guide assument qu'une imprimante UP-DR80MD est connectée. Si vous utilisez un autre modèle d'imprimante, remplacez chaque indication « UP-DR80MD » par le nom du modèle de votre imprimante lors de la lecture des messages d'écran dans ce guide.

# Installation du pilote d'imprimante dans Windows Vista

## Avant l'installation


### A propos des mises à jour de version


Si vous actualisez un pilote d'imprimante, retirez le pilote d'imprimante précédent avant le début de l'installation.

Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section « Désinstallation du pilote d'imprimante dans Windows Vista » dans ce guide.

Si l'installation échoue ou est annulée, redémarrez votre ordinateur avant d'essayer une nouvelle installation.

### Connexion USB 2.0


L'imprimante est conforme aux spécifications USB 2.0. Cependant, si votre ordinateur ou concentrateur USB n'est pas compatible avec USB 2.0, le message suivant apparaît lors du raccordement de l'imprimante. Cliquez sur  pour fermer le message.

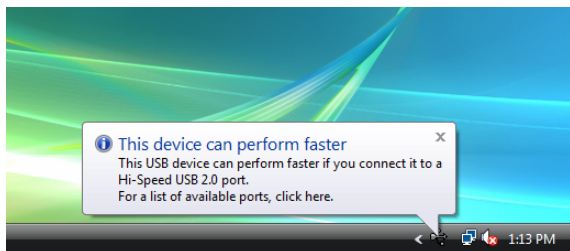

## Installation dans Windows Vista

- 1 Raccordez l'imprimante (une seule) pour laquelle le pilote doit être installé à l'ordinateur.
- 2 Mettez sous tension l'imprimante raccordée.
- 3 Mettez l'ordinateur sous tension et ouvrez une session en tant qu'administrateur du système ou membre du groupe administrateurs.

La boîte de dialogue [Found New Hardware] apparaît.

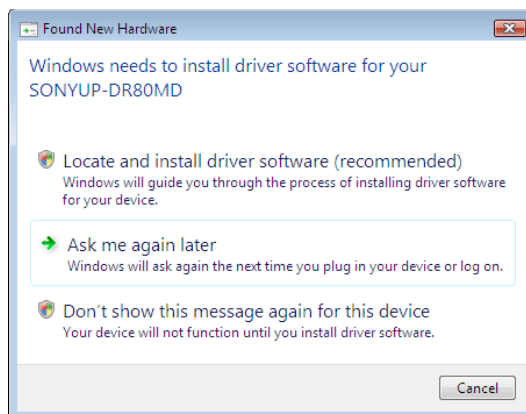


Si le message « Device driver software was not successfully installed » apparaît et la boîte de dialogue [Found New Hardware] n'apparaît pas, essayez de déconnecter et de reconnecter le câble USB. Si la boîte de dialogue [Found New Hardware] n'apparaît pas, effectuez les étapes décrites ci-dessous, avec l'imprimante pour laquelle le pilote d'imprimante doit être installé sous tension et raccordée à l'ordinateur. (Toute autre imprimante USB ou imprimante installée précédemment ne doit pas être raccordée en même temps.)


- ① Cliquez sur [Start] et sélectionnez [Control Panel].
- ② Double-cliquez sur [System].
- ③ Cliquez sur [Device Manager].  
La boîte de dialogue [User Account Control] apparaît.
- ④ Cliquez sur [Continue].  
La fenêtre [Device Manager] apparaît.
- ⑤ Cliquez sur [+] à gauche de [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Sélectionnez [USB Printing support], puis sélectionnez [Uninstall] dans le menu [Action].
- ⑦ Redémarrez l'ordinateur.  
La boîte de dialogue [Found New Hardware] apparaît.

- 4 Cliquez sur [Locate and install driver software (recommended)].


La boîte de dialogue suivante apparaît.

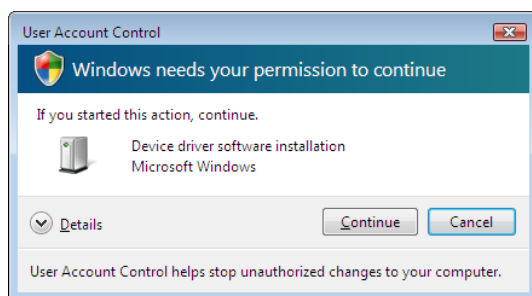

- 5 Cliquez sur [Continue].
- 6 Cliquez sur [Don't search online] si la boîte de dialogue suivante apparaît.

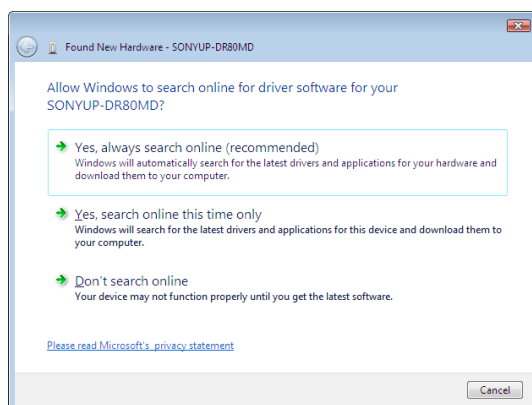

L'écran change comme suit.

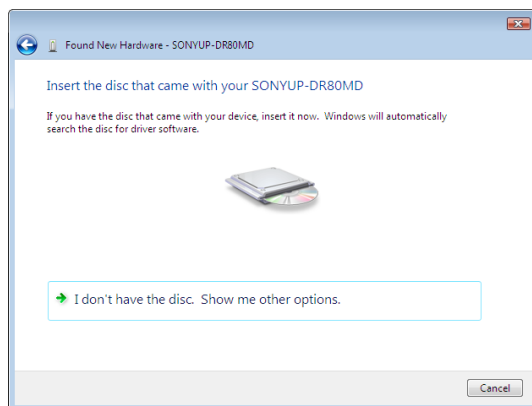


A partir de ce point, la procédure diffère en fonction de l'utilisation ou non du CD-ROM fourni (si vous avez téléchargé le pilote en ligne).


## Procédure avec le CD-ROM fourni

- 7 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.

L'écran change comme suit.

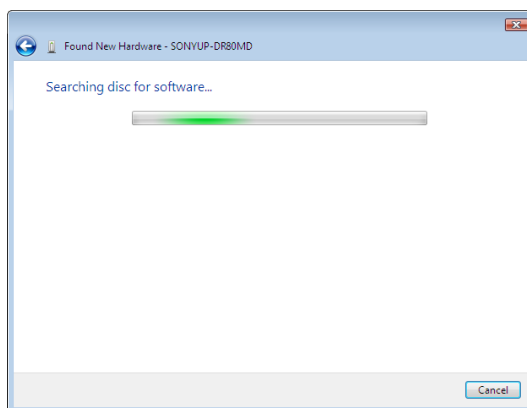


Une fois la recherche de logiciel terminée, la boîte de dialogue suivante apparaît.

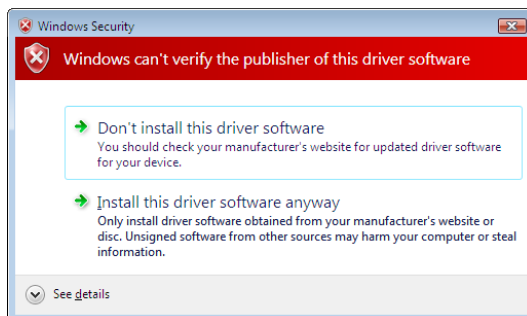


- 8 Cliquez sur [Install this driver software anyway].

La boîte de dialogue se ferme et la boîte de dialogue [Found New Hardware] réapparaît.

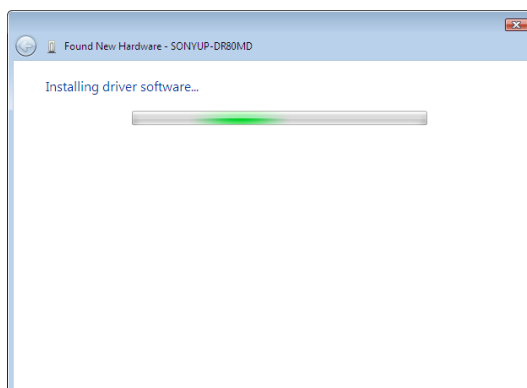

Après avoir copié les fichiers, l'écran change comme suit.

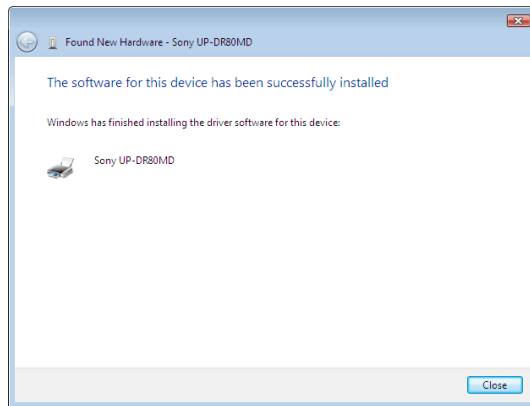


9 Cliquez sur [Close].

Ceci termine l'installation du pilote d'imprimante.

## Procédure sans le CD-ROM fourni


7 Cliquez sur [I don't have the disc. Show me other options].

L'écran change comme suit.

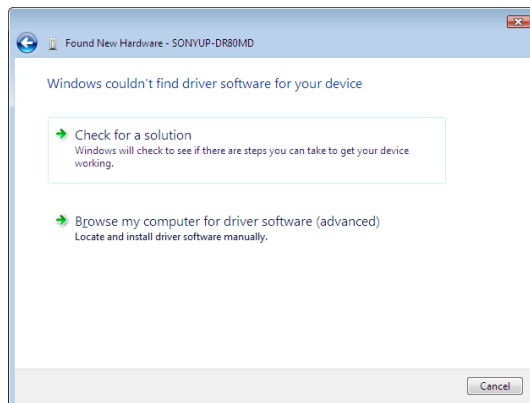

8 Cliquez sur [Browse my computer for driver software (advanced)].


L'écran change comme suit.

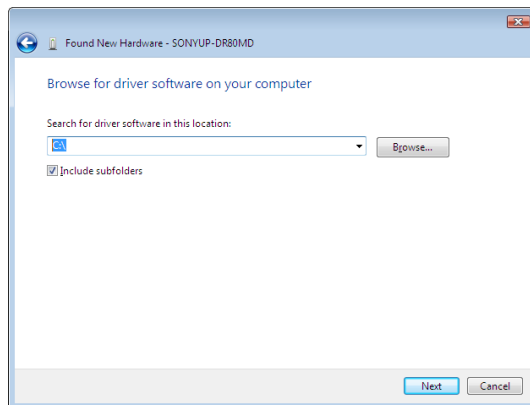

9 Cliquez sur [Browse] pour ouvrir la boîte de dialogue [Browse For Folder]. Spécifiez le dossier dans lequel le fichier d'installation téléchargé a été extrait, puis cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Browse For Folder].


10 Cliquez sur [Next].

La boîte de dialogue suivante apparaît.

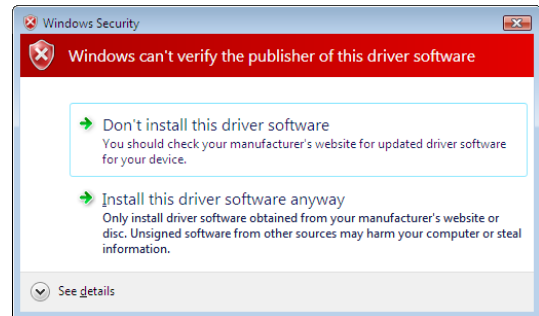


11 Cliquez sur [Install this driver software anyway].

La boîte de dialogue se ferme et la boîte de dialogue [Found New Hardware] réapparaît.

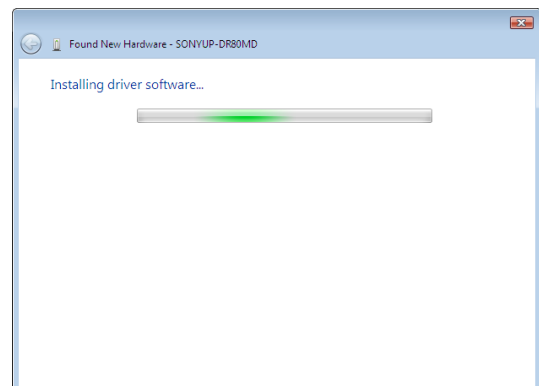

Après avoir copié les fichiers, l'écran change comme suit.

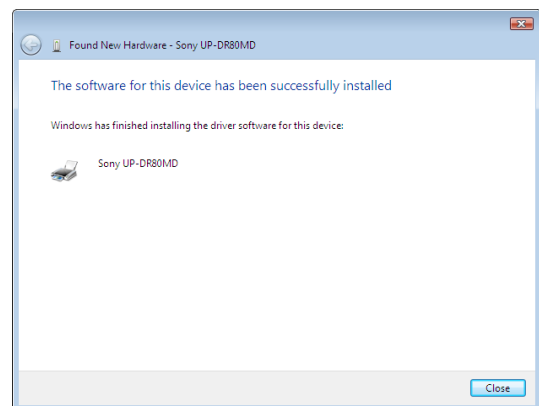

12 Cliquez sur [Close].

Ceci termine l'installation du pilote d'imprimante.


## Désinstallation du pilote d'imprimante dans Windows Vista

Cette section décrit comment retirer le pilote d'imprimante.


### Remarque

Pendant la procédure de désinstallation, l'imprimante ne doit pas être raccordée à l'ordinateur. Si la boîte de dialogue [Found New Hardware] apparaît, débranchez le câble entre l'ordinateur et l'imprimante, cliquez sur [Cancel] sur tous les écrans pour fermer la boîte de dialogue puis recommencez la procédure de désinstallation.


- 1 Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble entre l'ordinateur et l'imprimante.
- 2 Mettez l'ordinateur sous tension et ouvrez une session en tant qu'administrateur du système ou membre du groupe administrateurs.
- 3 Cliquez sur [Start], sélectionnez [Control Panel], puis sélectionnez [Programs and Features].

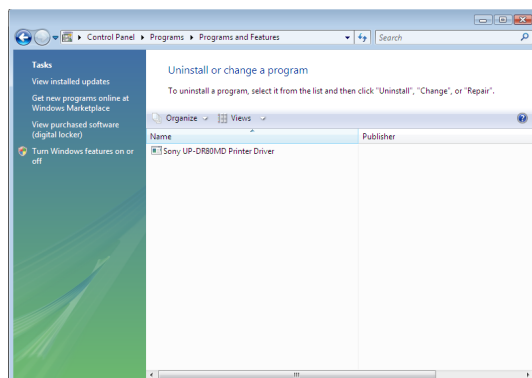

- 4 Sélectionnez le pilote d'imprimante dans la liste [Uninstall or change a program], puis cliquez sur [Uninstall/Change].

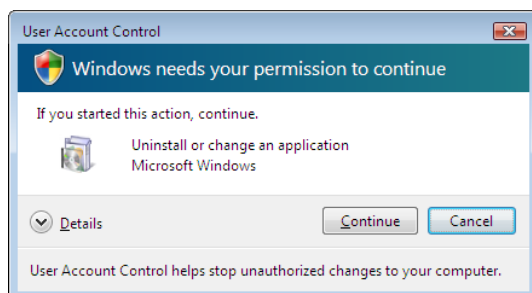


- 5 Cliquez sur [Continue].

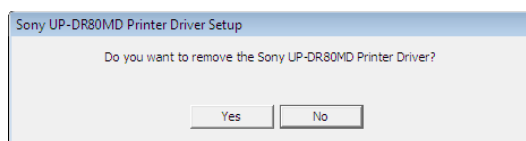

- 6 Cliquez sur [Yes].

Quand le pilote d'imprimante a été désinstallé, la boîte de dialogue suivante apparaît.

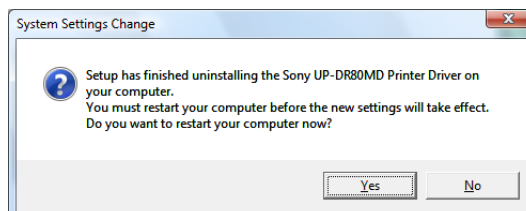

- 7 Cliquez sur [Yes].

L'ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote d'imprimante.

# Installation du pilote d'imprimante dans Windows XP

## Avant l'installation

### A propos des mises à jour logicielles

Si vous actualisez un pilote d'imprimante, retirez le pilote d'imprimante précédent avant le début de l'installation.


Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section « Désinstallation du pilote d'imprimante sous Windows XP » dans ce guide.

Si l'installation échoue ou est annulée, redémarrez votre ordinateur avant d'essayer une nouvelle installation.

#### Remarque

Veillez à redémarrer l'ordinateur après l'installation ou la désinstallation du pilote d'imprimante. A moins de redémarrer l'ordinateur, un fonctionnement instable peut en résulter.

## Connexion USB 2.0


L'imprimante est compatible avec le pilote USB 2.0. Cependant, si votre ordinateur ou concentrateur USB n'est pas compatible avec USB 2.0, le message suivant apparaît lors du raccordement de l'imprimante. Cliquez sur  pour fermer le message.



### A propos de Driver Signing Options

Ce pilote d'imprimante actuel n'ayant pas passé le test du Windows Logo, le message d'erreur suivant peut s'afficher pendant l'installation, empêchant l'installation du pilote.

Dans la boîte de dialogue [Driver Signing Options], sélectionnez [Ignore] ou [Warn] dans la zone de groupe [What action do you want Windows to take?]. Si vous sélectionnez [Block], il vous est impossible d'installer le pilote d'imprimante.

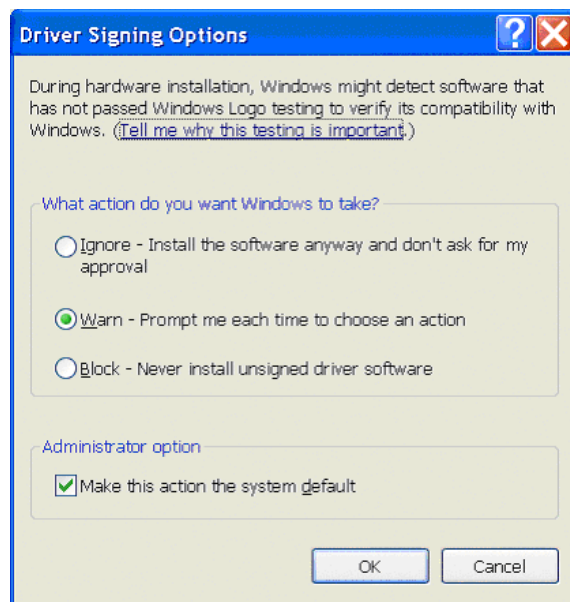

Ouvrez la boîte de dialogue [Driver Signing Options] comme suit :

- ① Dans le menu [Start], cliquez sur [Control Panel].
- ② Double-cliquez sur [System].  
La boîte de dialogue [System Properties] s'affiche.
- ③ Cliquez sur l'onglet [Hardware].
- ④ Cliquez sur [Driver Signing].

Toutes les explications de ce guide partent du principe que le réglage de cette boîte de dialogue est [Warn].

## Installation dans Windows XP

- 1 Raccordez l'imprimante (une seule) pour laquelle le pilote doit être installé à l'ordinateur.
- 2 Mettez sous tension l'imprimante raccordée.
- 3 Mettez l'ordinateur sous tension, puis ouvrez une session en tant qu'administrateur système ou en tant que membre du groupe Administrateurs.

La boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] s'affiche.






- Si la même boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] qu'à l'étape 3 apparaît, passez à l'étape 4.
- Si une boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] différente de celle de l'étape 3 apparaît, passez à l'étape 5.
- Si la boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] n'apparaît pas, effectuez les étapes décrites ci-dessous, avec l'imprimante pour laquelle le pilote d'imprimante doit être installé sous tension et raccordée à l'ordinateur. (Toute autre imprimante USB ou imprimantes installées précédemment ne doivent pas être raccordées en même temps.)


- ① Dans le menu [Start], cliquez sur [Control Panel].
- ② Cliquez deux fois sur [System].  
La boîte de dialogue [System Properties] s'affiche.
- ③ Cliquez sur l'onglet [Hardware].
- ④ Cliquez sur la touche [Device Manager].  
La fenêtre [Device Manager] s'affiche.
- ⑤ Cliquez sur [+] à gauche de [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Cliquez à droite sur [USB Printing support], puis ouvrez [Properties]. Confirmez que le nom du modèle d'imprimante actuellement raccordée est sélectionné pour [Location], puis sélectionnez [Uninstall] dans le menu [Action].
- ⑦ Redémarrez l'ordinateur.  
Après le démarrage de Windows XP, la boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] s'affiche.

#### 4 Cliquez sur [No, not this time] et sur [Next].

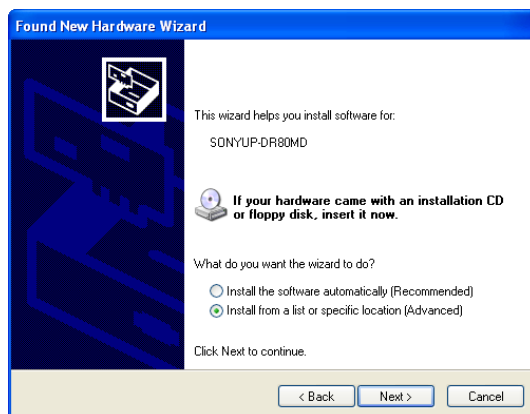

#### 5 Sélectionnez [Install from a list or specific location (Advanced)], puis cliquez sur [Next].

L'écran suivant s'affiche.

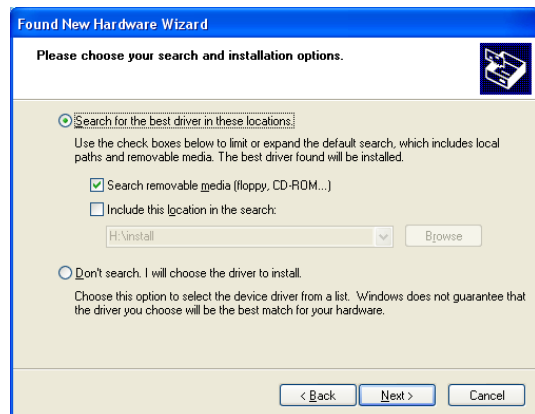

#### 6 Spécifiez l'emplacement du fichier d'installation du pilote d'imprimante. La procédure diffère en fonction de l'utilisation ou non du CD-ROM fourni (si vous avez téléchargé le pilote en ligne).

##### Procédure avec le CD-ROM fourni

Sélectionnez [Search for the best driver in these locations] et [Search removable media (floppy, CD-ROM...)], puis insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.

##### Procédure sans le CD-ROM fourni

Sélectionnez [Search for the best driver in these locations] et [Include this location in the search], puis cliquez sur [Browse] pour ouvrir la boîte de dialogue [Browse For Folder]. Spécifiez le dossier dans lequel le fichier d'installation téléchargé a été extrait, puis cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Browse For Folder].

#### 7 Cliquez sur [Next].

La boîte de dialogue suivante s'affiche.



- 8 Cliquez sur [Continue Anyway].

Une fois que les fichiers ont été copiés, l'écran suivant apparaît.



- 9 Cliquez sur [Finish].

L'installation du pilote d'imprimante pour Windows XP est terminée.

- 10 Redémarrez l'ordinateur.

## Désinstallation du pilote d'imprimante sous Windows XP


Cette section décrit comment retirer le pilote d'imprimante.

### Remarque

Pendant la procédure de désinstallation, l'imprimante ne doit pas être raccordée à l'ordinateur. Si la boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] apparaît, débranchez le câble entre l'ordinateur et l'imprimante, cliquez sur [Cancel] sur tous les écrans pour fermer la boîte de dialogue, puis recommencez la procédure de désinstallation.


- 1 Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble entre l'ordinateur et l'imprimante.
- 2 Mettez l'ordinateur sous tension et ouvrez une session en tant qu'administrateur du système ou membre du groupe administrateurs.

- 3 Cliquez sur [Start], sélectionnez [Control Panel], puis sélectionnez [Add or Remove Programs].

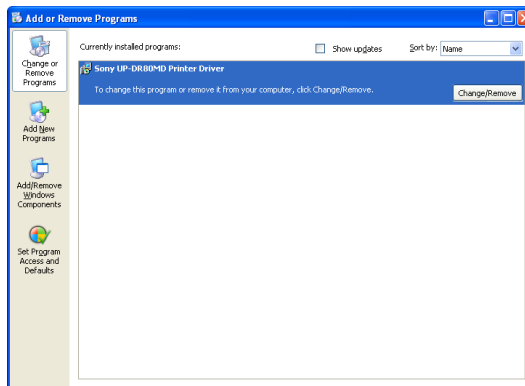

- 4 Sélectionnez le pilote d'imprimante dans la liste [Uninstall or change a program], puis cliquez sur [Uninstall/Change].

L'écran suivant s'affiche.

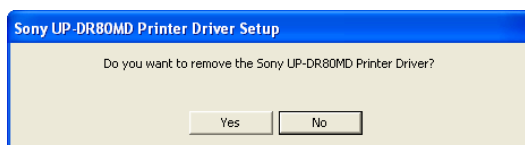

- 5 Cliquez sur [Yes].

Quand le pilote d'imprimante a été désinstallé, la boîte de dialogue suivante apparaît.



- 6 Cliquez sur [Yes].

L'ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote d'imprimante.

# Installation du pilote d'imprimante sous Windows 2000

## Avant l'installation

### A propos des mises à jour de version

Si vous actualisez un pilote d'imprimante, retirez le pilote d'imprimante précédent avant le début de l'installation.

Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section « Désinstallation du pilote d'imprimante sous Windows 2000 » dans ce guide.

Si l'installation échoue ou est annulée, redémarrez votre ordinateur avant d'essayer une nouvelle installation.

#### Remarque

Veillez à redémarrer l'ordinateur après l'installation ou la désinstallation du pilote d'imprimante. A moins de redémarrer l'ordinateur, un fonctionnement instable peut en résulter.


### A propos de Driver Signing Options

Le pilote d'imprimante n'ayant pas passé le test du logo Windows, si un message d'erreur s'affiche lors de l'installation, l'installation peut échouer.

Assurez-vous que [Ignore] ou [Warn] est sélectionné sous [File signature verification] dans la boîte de dialogue [Driver Signing Options]. Vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante si [Block] est sélectionné.

Ouvrez la boîte de dialogue [Driver Signing Options] comme suit :

- ① Dans le menu [Start], pointez sur [Settings], puis cliquez sur [Control Panel].
- ② Cliquez deux fois sur la touche [System]. La boîte de dialogue [System Properties] s'affiche.
- ③ Cliquez sur l'onglet [Hardware].
- ④ Cliquez sur [Driver Signing].

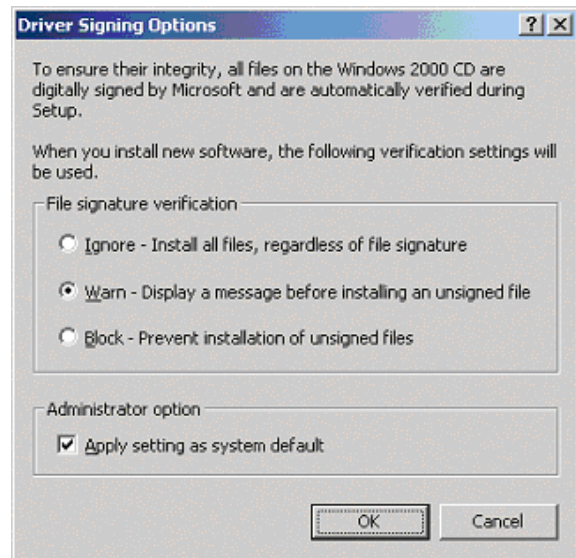


Toutes les explications de ce guide partent du principe que le réglage de cette boîte de dialogue est [Warn].

## Installation dans Windows 2000

- 1 Raccordez l'imprimante (une seule) pour laquelle le pilote doit être installé à l'ordinateur.
- 2 Mettez sous tension l'imprimante raccordée.
- 3 Mettez l'ordinateur sous tension, puis ouvrez une session en tant qu'administrateur système ou en tant que membre du groupe Administrateurs.

Après le démarrage de Windows 2000, la boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] s'affiche.

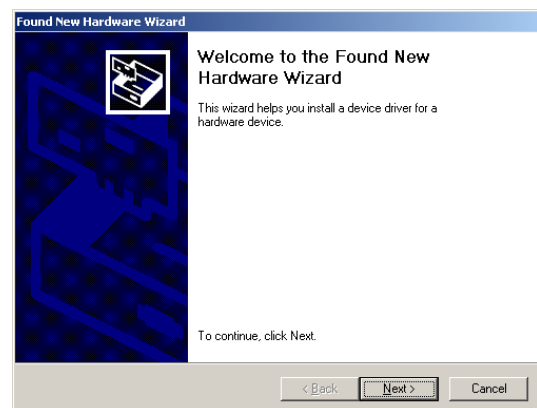

### Si la boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] ne s'affiche pas

Exécutez les opérations suivantes lorsque l'imprimante à installer est encore sous tension et connectée à l'ordinateur. (Toute autre imprimante USB ou imprimante installée précédemment ne doit pas être raccordée en même temps.)

- ① Dans le menu [Start], pointez sur [Settings], puis cliquez sur [Control Panel].
  - ② Cliquez deux fois sur [System]. La boîte de dialogue [System Properties] s'affiche.
  - ③ Cliquez sur l'onglet [Hardware].
  - ④ Cliquez sur la touche [Device Manager]. La fenêtre [Device Manager] s'affiche.
  - ⑤ Cliquez sur [+] à gauche de [Universal Serial Bus controllers].
  - ⑥ Cliquez à droite sur [USB Printing support], puis ouvrez [Properties]. Confirmez que le nom du modèle d'imprimante actuellement raccordée est sélectionné pour [Location], puis sélectionnez [Uninstall] dans le menu [Action].
  - ⑦ Redémarrez l'ordinateur.
- Après le démarrage de Windows 2000, la boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] s'affiche.

4 Cliquez sur [Next].

L'écran suivant s'affiche.



5 Sélectionnez [Search for a suitable driver ...], puis cliquez sur [Next].


L'écran suivant s'affiche.




## Procédure avec le CD-ROM fourni

- 6 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.
- 7 Sélectionnez la case d'option [CD-ROM drives], puis cliquez sur la touche [Next].

L'écran suivant s'affiche.

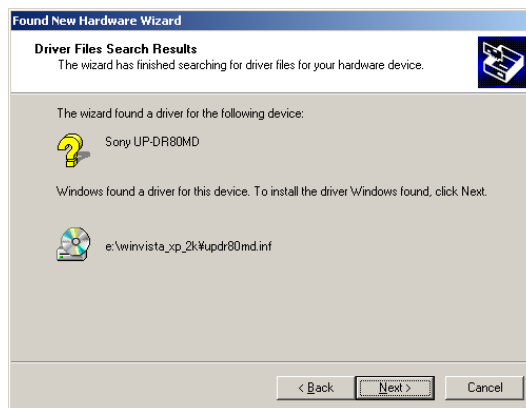


8 Cliquez sur [Next].

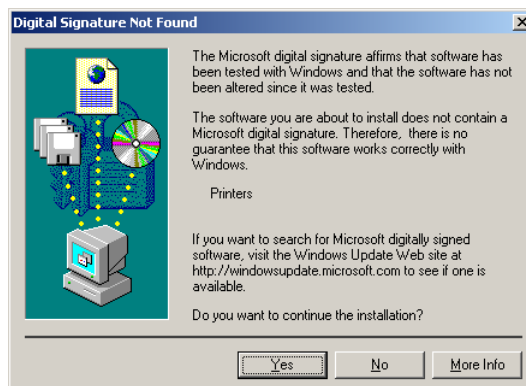

Si la boîte de dialogue [Digital Signature Not Found] s'affiche, cliquez sur [Yes].

Après avoir copié les fichiers, l'écran change comme suit.

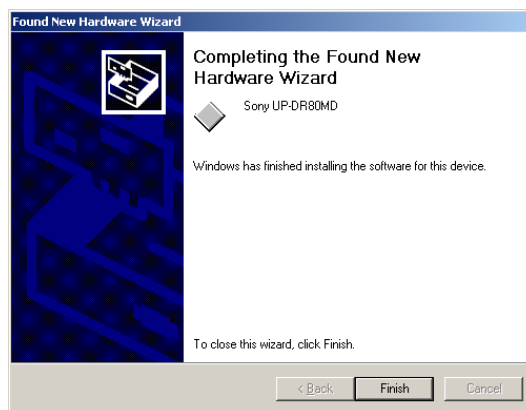

9 Cliquez sur [Finish].

L'installation du pilote d'imprimante pour Windows 2000 est terminée.

10 Redémarrez l'ordinateur.

## Procédure sans le CD-ROM fourni

6 Sélectionnez [Specify a location], puis cliquez sur [Next].


L'écran change comme suit.




7 Cliquez sur [Browse] pour ouvrir la boîte de dialogue [Locate File]. Spécifiez le dossier dans lequel le fichier d'installation téléchargé a été extrait, puis cliquez sur [Open] pour fermer la boîte de dialogue [Locate File].

8 Cliquez sur [OK].

L'écran change comme suit.

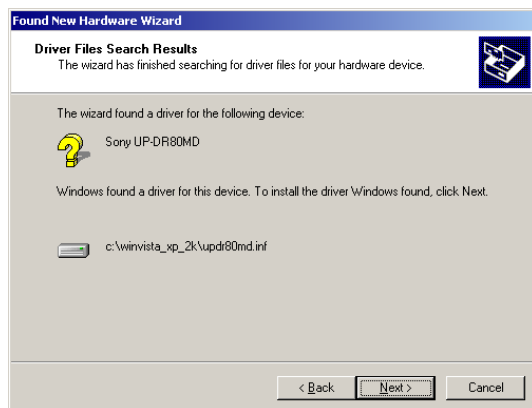

9 Cliquez sur [Next].

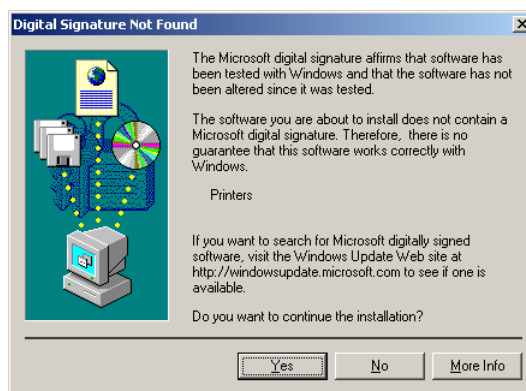

Si la boîte de dialogue [Digital Signature Not Found] s'ouvre, cliquez sur [Yes].

Après avoir copié les fichiers, l'écran change comme suit.



10 Cliquez sur [Finish].

L'installation du pilote d'imprimante pour Windows 2000 est terminée.

11 Redémarrez l'ordinateur.

### Remarque

Si [Cancel] à l'étape 7 ou [No] à l'étape 8 a été sélectionné, la boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] risque de ne pas s'afficher au cours de la prochaine installation. Dans ce cas, exécutez la procédure décrite dans « Si la boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] ne s'affiche pas » à l'étape 3.


## Désinstallation du pilote d'imprimante sous Windows 2000

Cette section décrit comment retirer le pilote d'imprimante.

### Remarque


Pendant la procédure de désinstallation, l'imprimante ne doit pas être raccordée à l'ordinateur. Si la boîte de dialogue [Found New Hardware Wizard] apparaît, débranchez le câble entre l'ordinateur et l'imprimante, cliquez sur [Cancel] sur tous les écrans pour fermer la boîte de dialogue, puis recommencez la procédure de désinstallation.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble entre l'ordinateur et l'imprimante.
- 2 Mettez l'ordinateur sous tension et ouvrez une session en tant qu'administrateur du système ou membre du groupe administrateurs.
- 3 Cliquez sur [Start], pointez sur [Settings], puis cliquez sur [Control Panel]. Ensuite double-cliquez sur [Add/Remove Programs].

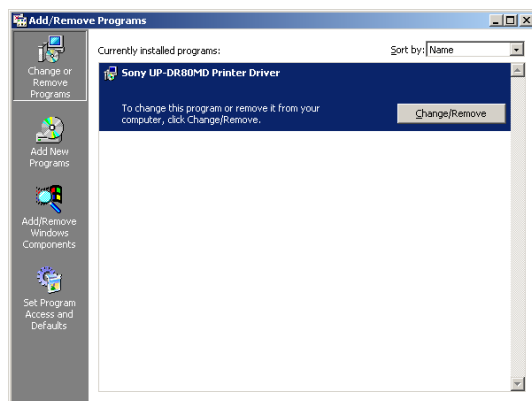

- 4 Sélectionnez le pilote d'imprimante dans la liste [Currently installed programs], puis cliquez sur [Change/Remove].

La boîte de dialogue suivante apparaît.

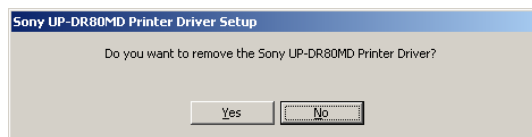

- 5 Cliquez sur [Yes].

Quand le pilote d'imprimante a été désinstallé, la boîte de dialogue suivante apparaît.



- 6 Cliquez sur [Yes].

L'ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote d'imprimante.