

Printer Driver

Οδηγός εγκατάστασης

Ο οδηγός αυτός περιγράφει την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για τα Windows Vista, Windows XP και Windows 2000.

Πριν από τη χρήση αυτού του λογισμικού

Πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, διαβάστε οπωσδήποτε το αρχείο "ReadMe".

Πίνακας περιεχομένων

Απαιτήσεις ως προς το περιβάλλον λειτουργίας	3
Σχετικά με το παρόν έγγραφο	3
Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista	4
Πριν από την εγκατάσταση	4
Εγκατάσταση στα Windows Vista	4
Απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista	7
Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows XP	8
Πριν από την εγκατάσταση	8
Εγκατάσταση στα Windows XP	8
Απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows XP	10
Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows 2000	11
Πριν από την εγκατάσταση	11
Εγκατάσταση στα Windows 2000	12
Απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows 2000	14

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation. Άλλες επωνυμίες εταιριών και ονομασίες προϊόντων που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό είναι επίσης εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα.

Απαιτήσεις ως προς το περιβάλλον λειτουργίας

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ο υπολογιστής σας πρέπει να λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα.

- Windows Vista της Microsoft (η έκδοση 64-bit δεν υποστηρίζεται)
- Windows XP Professional/Home Edition της Microsoft (η έκδοση 64-bit δεν υποστηρίζεται)
- Microsoft Windows 2000 Professional

Σχετικά με το USB 2.0

- Ο εκτυπωτής συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές USB 2.0.
- Το USB 2.0 είναι πλήρως συμβατό με την προηγούμενη έκδοση USB 1.1.
- Το USB 2.0 υποστηρίζει τη συμβατική σύνδεση πλήρους (χαμηλής) ταχύτητας (Full (low) speed) και τη λειτουργία υψηλής ταχύτητας (Hi-Speed).
- Η σύνδεση και λειτουργία σε πλήρη ταχύτητα (Full speed) είναι εφικτή σε περιβάλλον USB 1.1. Για τη λειτουργία υψηλής ταχύτητας (Hi-Speed) πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις.
 - Υπολογιστής
Υπολογιστής που υποστηρίζει USB υψηλής ταχύτητας (συμβατός με USB 2.0)*
 - Λειτουργικό σύστημα
Windows Vista, Windows XP Professional/Home Edition ή Windows 2000 Professional
 - Πρόγραμμα οδήγησης USB 2.0
Πρόγραμμα οδήγησης συσκευής USB 2.0 της Microsoft Corporation (δεν διασφαλίζεται η λειτουργία με άλλα προγράμματα οδήγησης USB 2.0.)
 - Πιστοποιημένο καλώδιο USB 2.0

* Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές USB 2.0, τις πλακέτες ή κάρτες επέκτασης USB 2.0.

Σημείωση

Όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος και αναμμένος, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής (αναστολής) ή αδρανοποίησης. Διαφορετικά, δεν εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία.

Σχετικά με το παρόν έγγραφο

Η επεξήγηση των λειτουργιών του Πίνακα Ελέγχου στο παρόν έγγραφο προϋποθέτει ότι τα Windows βρίσκονται στην Κλασική Προβολή. Για να μεταβείτε στην Κλασική Προβολή, κάντε κλικ στο [Start], επιλέξτε [Control Panel] και κάντε κλικ στο [Switch to Classic View] στις Ιδιότητες του Πίνακα ελέγχου, στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Τα μηνύματα οθόνης που εμφανίζονται σε αυτόν τον οδηγό θεωρούν ότι υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπωτής UP-DR80MD. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό μοντέλο εκτυπωτή, αντικαταστήστε οποιαδήποτε αναφορά στον "UP-DR80MD" με το όνομα μοντέλου του εκτυπωτή σας, καθώς διαβάζετε τα μηνύματα οθόνης σε αυτόν τον οδηγό.

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista


Πριν από την εγκατάσταση


Σχετικά με τις αναβαθμίσεις των εκδόσεων

Αν αναβαθμίζετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, απεγκαταστήστε το προηγούμενο προτού να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Για λεπτομέρειες σχετικά με την απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ανατρέξτε στην παράγραφο "Απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista" του παρόντος οδηγού.

Επιπλέον, εάν η εγκατάσταση αποτύχει ή ακυρωθεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας πριν επιχειρήσετε ξανά την εγκατάσταση.

Σύνδεση USB 2.0


Ο εκτυπωτής συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές USB 2.0. Ωστόσο, εάν ο υπολογιστής ή ο διανομέας σας (hub) USB δεν είναι συμβατός με USB 2.0, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα όταν συνδέσετε τον εκτυπωτή: Κάντε κλικ στο  για να κλείσετε το μήνυμα.

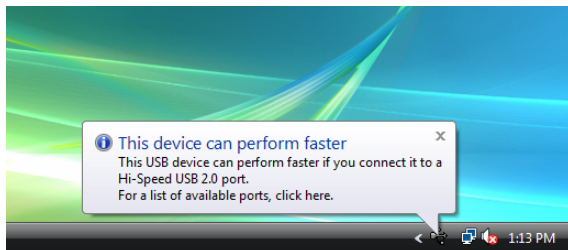

Εγκατάσταση στα Windows Vista

- 1 Συνδέστε τον εκτυπωτή (μόνο έναν) το πρόγραμμα οδήγησης του οποίου θέλετε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή.
- 2 Ανάψτε το συνδεδεμένο εκτυπωτή.
- 3 Ανάψτε τον υπολογιστή και συνδεθείτε ως διαχειριστής συστήματος ή ως μέλος της ομάδας Διαχειριστές.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware].

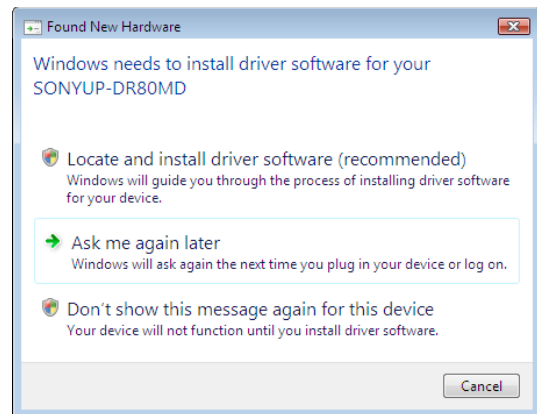


Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Device driver software was not successfully installed" και δεν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware], επιχειρήστε να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε το καλώδιο USB. Αν το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware] εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, εκτελέστε τα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω, με τον εκτυπωτή, το πρόγραμμα οδήγησης του οποίου πρόκειται να εγκατασταθεί, αναμμένο και συνδεδεμένο στον υπολογιστή. (Τη στιγμή αυτή δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι άλλοι εκτυπωτές USB ή προεγκατεστημένοι εκτυπωτές.)

- ① Κάντε κλικ στο [Start] και επιλέξτε [Control Panel].
- ② Κάντε διπλό κλικ στο [System].
- ③ Κάντε κλικ στο [Device Manager]. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [User Account Control].
- ④ Κάντε κλικ στο [Continue]. Εμφανίζεται το παράθυρο [Device Manager].
- ⑤ Κάντε κλικ στο [+] στα αριστερά του [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Επιλέξτε [USB Printing support] και μετά επιλέξτε [Uninstall] από το μενού [Action].

⑦ Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware].


4 Κάντε κλικ στο [Locate and install driver software (recommended)].

Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

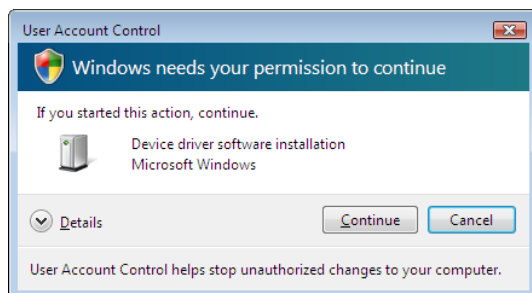


5 Κάντε κλικ στο [Continue].

6 Κάντε κλικ στο [Don't search online], αν εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο διαλόγου.

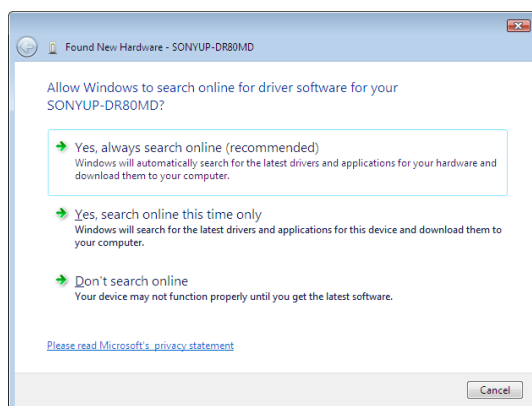

Η οθόνη αλλάζει ως εξής.

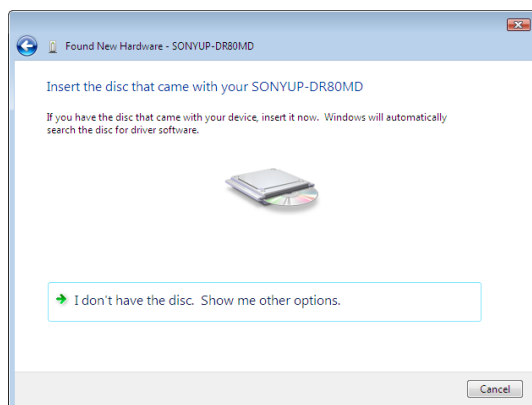


Από το σημείο αυτό, η διαδικασία διαφέρει αναλόγως με το αν χρησιμοποιείτε ή όχι το παρεχόμενο CD-ROM (αν "κατεβάσατε" το πρόγραμμα οδήγησης).


Διαδικασία με το παρεχόμενο CD-ROM

7 Βάλτε το παρεχόμενο CD-ROM στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

Η οθόνη αλλάζει ως εξής.

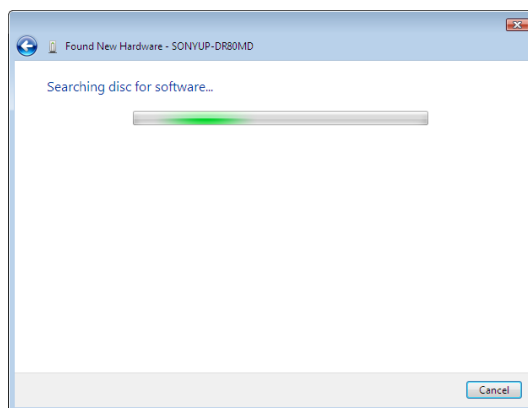


Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση του λογισμικού, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου.

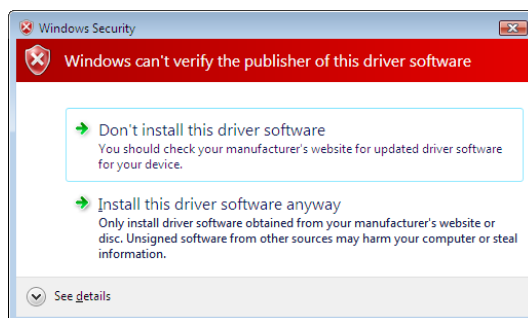


8 Κάντε κλικ στο [Install this driver software anyway].

Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και επανεμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware].

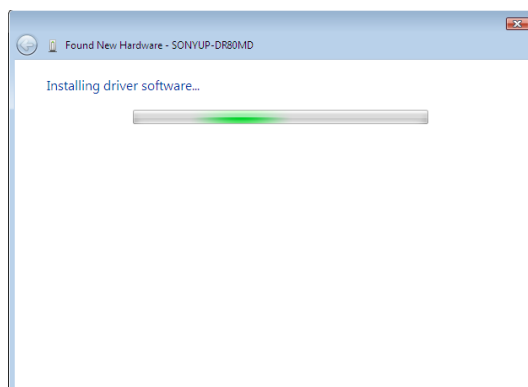

Μετά την αντιγραφή των αρχείων, η οθόνη αλλάζει ως εξής.

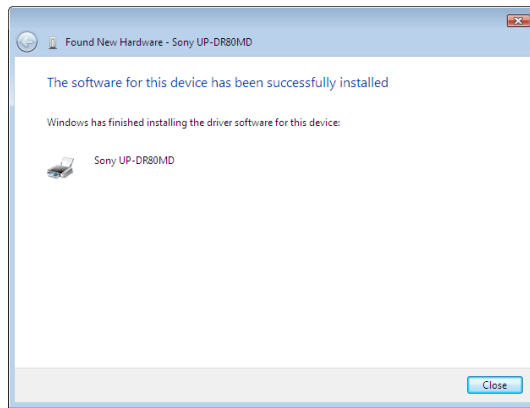


9 Κάντε κλικ στο [Close].

Έτσι ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Διαδικασία χωρίς το παρεχόμενο CD-ROM


7 Κάντε κλικ στο [I don't have the disc. Show me other options].

Η οθόνη αλλάζει ως εξής.

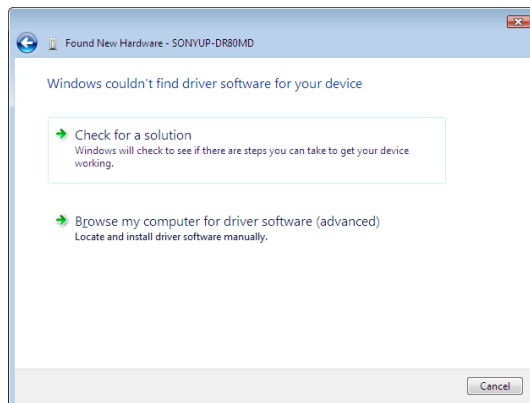

8 Κάντε κλικ στο [Browse my computer for driver software (advanced)].


Η οθόνη αλλάζει ως εξής.

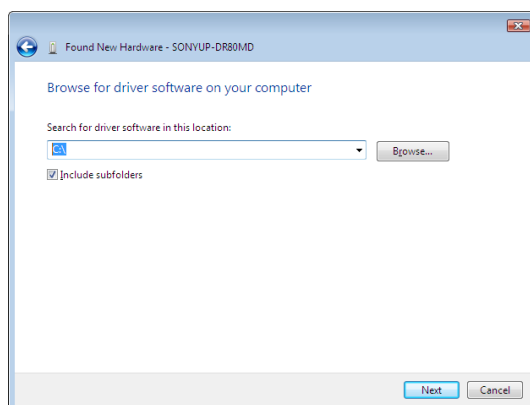

9 Κάντε κλικ στο [Browse] για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου [Browse For Folder]. Ορίστε το φάκελο στον οποίο αποσυμπίεσατε το αρχείο εγκατάστασης που κατεβάσατε και κάντε κλικ στο [OK] για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου [Browse For Folder].


10 Κάντε κλικ στο [Next].

Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

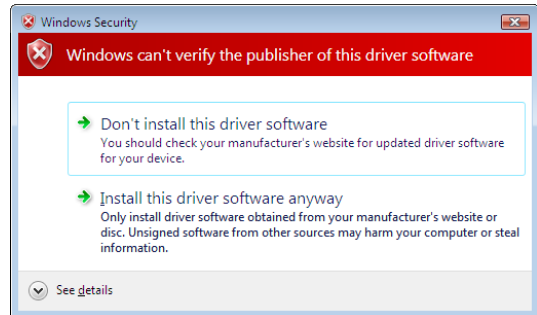


11 Κάντε κλικ στο [Install this driver software anyway].

Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και επανεμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware].

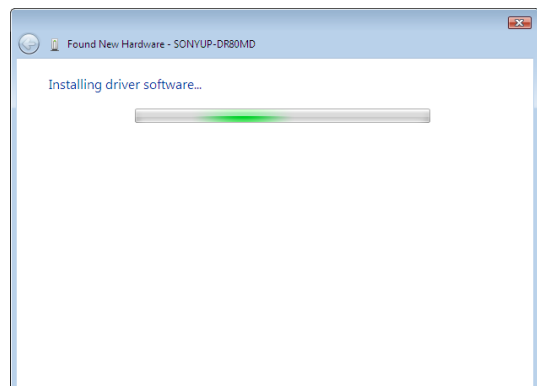

Μετά την αντιγραφή των αρχείων, η οθόνη αλλάζει ως εξής.

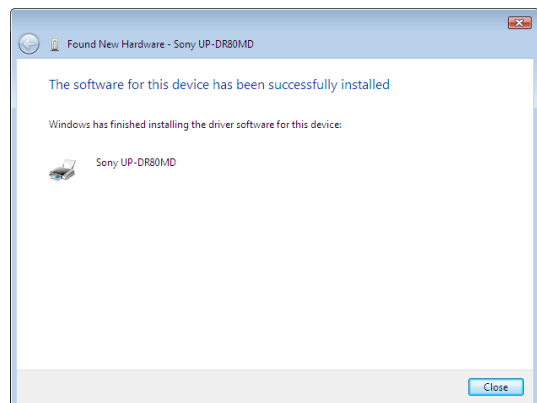

12 Κάντε κλικ στο [Close].

Έτσι ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.


Απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η διαδικασία απεγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.


Σημείωση

Όταν ξεκινήσει η διαδικασία απεγκατάστασης, ο εκτυπωτής δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware], αποσυνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο [Cancel] σε όλες τις οθόνες για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου και μετά επανεκκινήστε τη διαδικασία απεγκατάστασης.


- 1 Σβήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή.
- 2 Ανάψτε τον υπολογιστή και συνδεθείτε ως διαχειριστής συστήματος ή ως μέλος της ομάδας Διαχειριστές.
- 3 Κάντε κλικ στο [Start], επιλέξτε [Control Panel] και μετά επιλέξτε [Programs and Features].

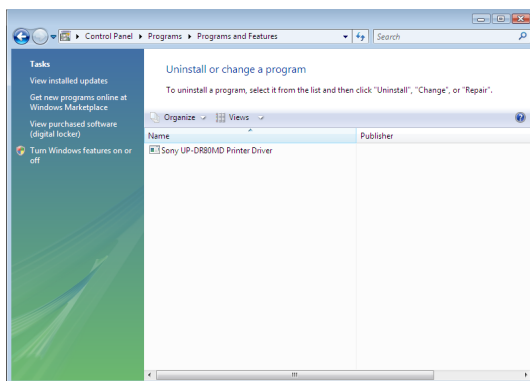

- 4 Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από τη λίστα [Uninstall or change a program] και μετά κάντε κλικ στο [Uninstall/Change].

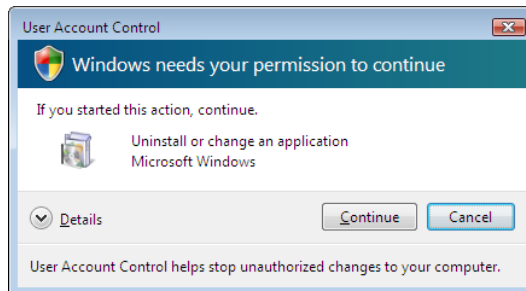


- 5 Κάντε κλικ στο [Continue].

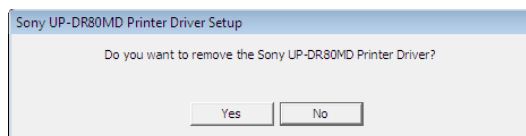

- 6 Κάντε κλικ στο [Yes].

Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

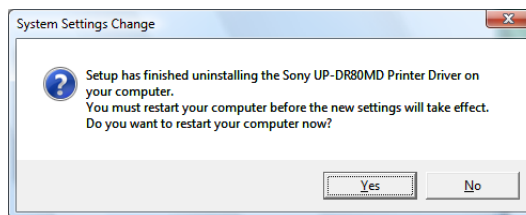

- 7 Κάντε κλικ στο [Yes].

Ο υπολογιστής εκτελεί επανεκκίνηση.

Έτσι ολοκληρώνεται η απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows XP

Πριν από την εγκατάσταση

Σχετικά με τις αναβαθμίσεις έκδοσης


Αν αναβαθμίζετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, απεγκαταστήστε το προηγούμενο προτού να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Για λεπτομέρειες σχετικά με την απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ανατρέξτε στην παράγραφο "Απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows XP" του παρόντος οδηγού.


Επιπλέον, εάν η εγκατάσταση αποτύχει ή ακυρωθεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας πριν επιχειρήσετε ξανά την εγκατάσταση.

Σημείωση

Πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Διαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιαστεί αστάθεια στη λειτουργία.

Σύνδεση USB 2.0


Ο εκτυπωτής είναι συμβατός με σύνδεση USB 2.0. Ωστόσο, εάν ο υπολογιστής ή ο διανομέας σας (hub) USB δεν είναι συμβατός με USB 2.0, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα όταν συνδέσετε τον εκτυπωτή: Κάντε κλικ στο  για να κλείσετε το μήνυμα.

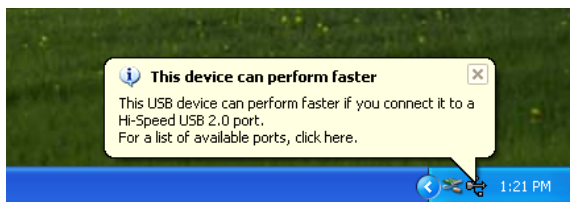

Σχετικά με τις επιλογές υπογραφής του προγράμματος οδήγησης

Το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν έχει περάσει τη δοκιμή Windows Logo, επομένως όταν κάνετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα μήνυμα σφάλματος που θα σας εμποδίσει να το εγκαταστήσετε.

Στο παράθυρο διαλόγου [Driver Signing Options], επιλέξτε [Ignore] ή [Warn] στο πλαίσιο ομάδας [What action do you want Windows to take?]. Εάν επιλέξετε [Block], δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

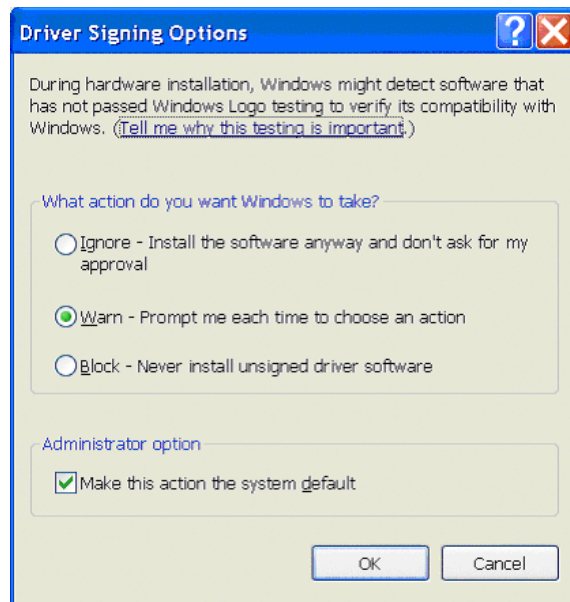

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου [Driver Signing Options] ως εξής:

- 1 Κάντε κλικ στο [Control Panel] του μενού [Start].
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο [System]. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [System Properties].
- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί [Driver Signing].

Όλες οι επεξηγήσεις που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτόν προϋποθέτουν ότι η ρύθμιση αυτού του παραθύρου διαλόγου είναι [Warn].

Εγκατάσταση στα Windows XP

- 1 Συνδέστε τον εκτυπωτή (μόνο έναν) το πρόγραμμα οδήγησης του οποίου θέλετε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή.
- 2 Ανάψτε το συνδεδεμένο εκτυπωτή.

- 3 Ανάψτε τον υπολογιστή και στη συνέχεια συνδεθείτε ως διαχειριστής συστήματος ή ως μέλος της ομάδας Διαχειριστές.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard].




- Αν εμφανιστεί το ίδιο παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard] όπως στο βήμα 3, προχωρήστε στο βήμα 4.
- Αν εμφανιστεί κάποιο παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard] διαφορετικό από αυτό του βήματος 3, προχωρήστε στο βήμα 5.
- Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard], εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες όσο ο εκτυπωτής, το πρόγραμμα οδήγησης του οποίου πρόκειται να εγκατασταθεί, είναι ακόμα αναμμένος και συνδεδεμένος στον υπολογιστή. (Τη στιγμή αυτή δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι άλλοι εκτυπωτές USB ή προεγκατεστημένοι εκτυπωτές.)

- ① Κάντε κλικ στο [Control Panel] του μενού [Start].
- ② Κάντε διπλό κλικ στο [System]. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [System Properties].
- ③ Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
- ④ Κάντε κλικ στο κουμπί [Device Manager]. Εμφανίζεται το παράθυρο [Device Manager].
- ⑤ Κάντε κλικ στο [+] στα αριστερά του [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Κάντε δεξί κλικ στο [USB Printing support] και ανοίξτε το [Properties]. Επιβεβαιώστε ότι για το [Location] είναι επιλεγμένο το όνομα μοντέλου του εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή και μετά επιλέξτε [Uninstall] από το μενού [Action].


- ⑦ Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μετά την εκκίνηση των Windows XP, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard].

- 4 Κάντε κλικ στο [No, not this time] και στη συνέχεια στο [Next].

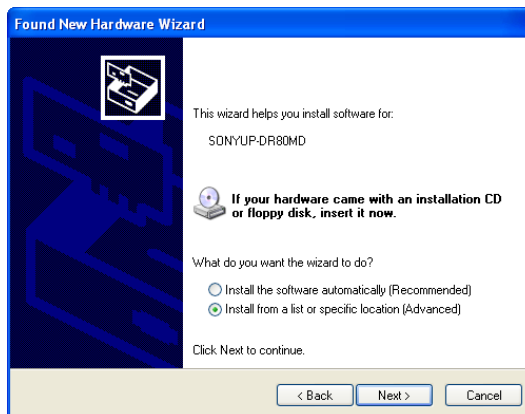

- 5 Επιλέξτε [Install from a list or specific location (Advanced)] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί [Next].

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

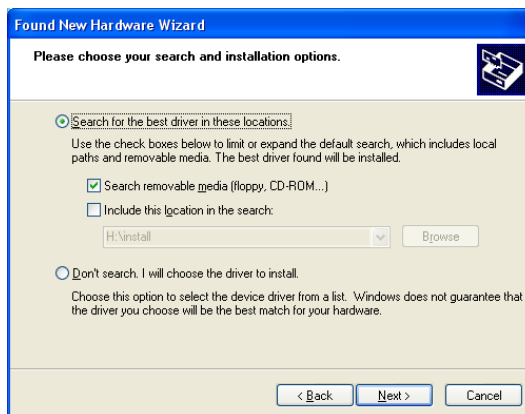

- 6 Ορίστε τη θέση του αρχείου εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Η διαδικασία διαφέρει αναλόγως με το αν χρησιμοποιείτε ή όχι το παρεχόμενο CD-ROM (αν "κατεβάσατε" το πρόγραμμα οδήγησης).

Διαδικασία με το παρεχόμενο CD-ROM

Επιλέξτε [Search for the best driver in these locations] και [Search removable media (floppy, CD-ROM...)], και στη συνέχεια βάλτε το παρεχόμενο CD-ROM στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

Διαδικασία χωρίς το παρεχόμενο CD-ROM

Επιλέξτε [Search for the best driver in these locations] και [Include this location in the search] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Browse] για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου [Browse For Folder]. Ορίστε το φάκελο στον οποίο αποσυμπιέσατε το αρχείο εγκατάστασης που κατεβάσατε και κάντε κλικ στο [OK] για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου [Browse For Folder].


7 Κάντε κλικ στο κουμπί [Next].

Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.



8 Κάντε κλικ στο κουμπί [Continue Anyway].

Μετά την αντιγραφή των αρχείων, εμφανίζεται η επόμενη οθόνη.

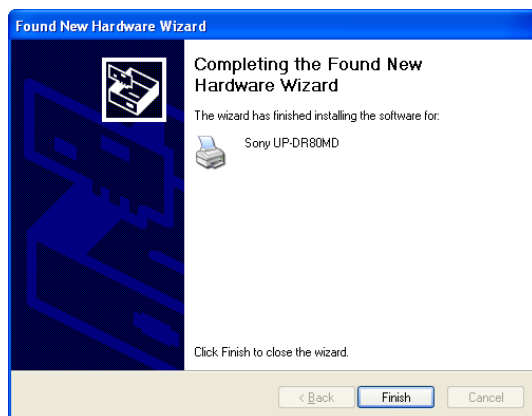

9 Κάντε κλικ στο κουμπί [Finish].

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή με τα Windows XP.

10 Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows XP

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η διαδικασία απεγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.


Σημείωση

Όταν ξεκινήσει η διαδικασία απεγκατάστασης, ο εκτυπωτής δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard], αποσυνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο [Cancel] σε όλες τις οθόνες για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου και μετά επανεκκινήστε τη διαδικασία απεγκατάστασης.

1 Σβήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή.


2 Ανάψτε τον υπολογιστή και συνδεθείτε ως διαχειριστής συστήματος ή ως μέλος της ομάδας Διαχειριστές.

3 Κάντε κλικ στο [Start], επιλέξτε [Control Panel] και μετά επιλέξτε [Add or Remove Programs].

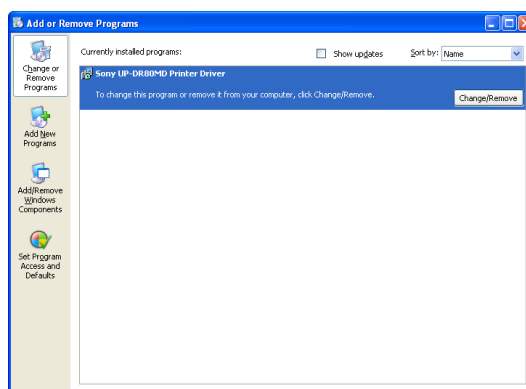


4 Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από τη λίστα [Uninstall or change a program] και μετά κάντε κλικ στο [Uninstall/Change].

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

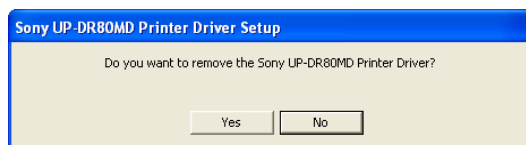

5 Κάντε κλικ στο [Yes].

Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

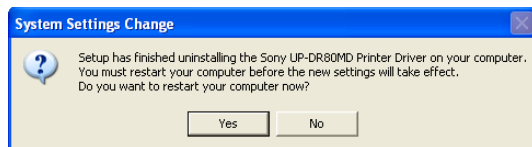

6 Κάντε κλικ στο [Yes].

Ο υπολογιστής εκτελεί επανεκκίνηση.

Έτσι ολοκληρώνεται η απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows 2000

Πριν από την εγκατάσταση

Σχετικά με τις αναβαθμίσεις έκδοσης

Αν αναβαθμίζετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, απεγκαταστήστε το προηγούμενο προτού να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Για λεπτομέρειες σχετικά με την απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ανατρέξτε στην παράγραφο "Απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows 2000" του παρόντος οδηγού.

Επιπλέον, εάν η εγκατάσταση αποτύχει ή ακυρωθεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας πριν επιχειρήσετε ξανά την εγκατάσταση.

Σημείωση

Πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Διαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιαστεί αστάθεια στη λειτουργία.

Σχετικά με τις επιλογές υπογραφής του προγράμματος οδήγησης


Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν έχει περάσει τη δοκιμή Windows Logo, επομένως σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση, η εγκατάσταση ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει [Ignore] ή [Warn] στο [File signature verification] στο παράθυρο διαλόγου [Driver Signing Options]. Δεν μπορεί να γίνει εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Block].

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου [Driver Signing Options] ως εξής:

- 1 Τοποθετήστε το δρομέα στο [Settings] του μενού [Start] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Control Panel].
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί [System]. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [System Properties].

- ③ Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
- ④ Κάντε κλικ στο κουμπί [Driver Signing].

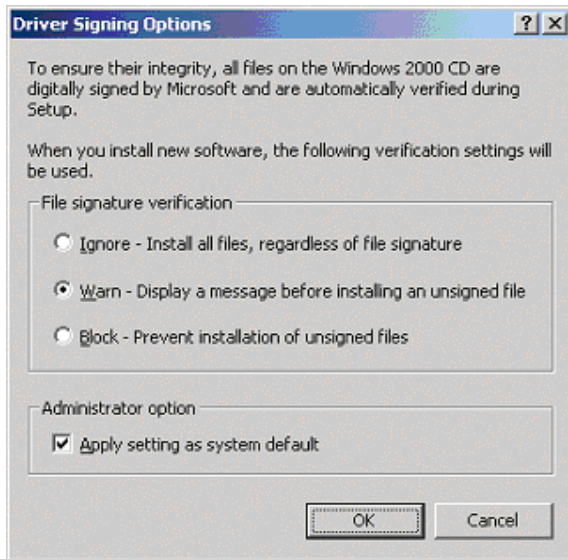

Όλες οι επεξηγήσεις που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτόν προϋποθέτουν ότι η ρύθμιση αυτού του παραθύρου διαλόγου είναι [Warn].

Εγκατάσταση στα Windows 2000

- 1 Συνδέστε τον εκτυπωτή (μόνο έναν) το πρόγραμμα οδήγησης του οποίου θέλετε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή.
- 2 Ανάψτε το συνδεδεμένο εκτυπωτή.
- 3 Ανάψτε τον υπολογιστή και στη συνέχεια συνδεθείτε ως διαχειριστής συστήματος ή ως μέλος της ομάδας Διαχειριστές.

Μετά την εκκίνηση των Windows 2000, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard].



Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard]

Εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες όσο ο εκτυπωτής, το πρόγραμμα οδήγησης του οποίου πρόκειται να εγκατασταθεί, είναι ακόμα αναμμένος και συνδεδεμένος στον υπολογιστή. (Τη στιγμή αυτή δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι άλλοι εκτυπωτές USB ή προεγκατεστημένοι εκτυπωτές.)

- ① Τοποθετήστε το δρομέα στο [Settings] του μενού [Start] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Control Panel].
- ② Κάντε διπλό κλικ στο [System]. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [System Properties].
- ③ Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
- ④ Κάντε κλικ στο κουμπί [Device Manager]. Εμφανίζεται το παράθυρο [Device Manager].
- ⑤ Κάντε κλικ στο [+] στα αριστερά του [Universal Serial Bus controllers].
- ⑥ Κάντε δεξί κλικ στο [USB Printing support] και ανοίξτε το [Properties]. Επιβεβαιώστε ότι για το [Location] είναι επιλεγμένο το όνομα μοντέλου του εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή και μετά επιλέξτε [Uninstall] από το μενού [Action].
- ⑦ Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μετά την εκκίνηση των Windows 2000, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard].

- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί [Next].

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



- 5 Επιλέξτε [Search for a suitable driver...] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί [Next].


Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.




Διαδικασία με το παρεχόμενο CD-ROM

- 6 Βάλτε το παρεχόμενο CD-ROM στη μονάδα δίσκου CD-ROM.
- 7 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [CD-ROM drives] και κάντε κλικ στο κουμπί [Next].

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

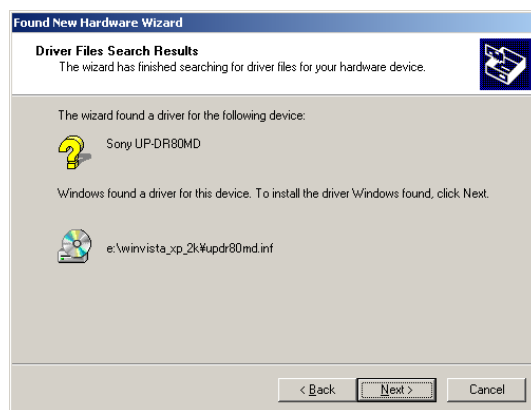


- 8 Κάντε κλικ στο κουμπί [Next].

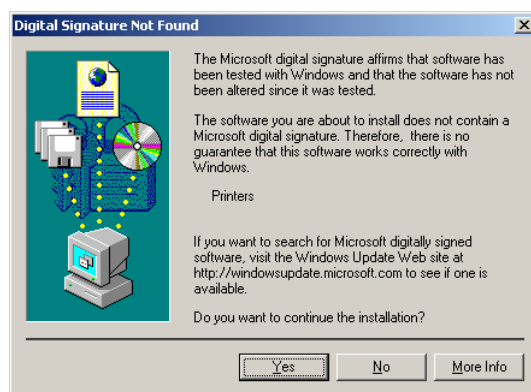

Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Digital Signature Not Found], κάντε κλικ στο κουμπί [Yes].

Μετά την αντιγραφή των αρχείων, η οθόνη αλλάζει ως εξής.

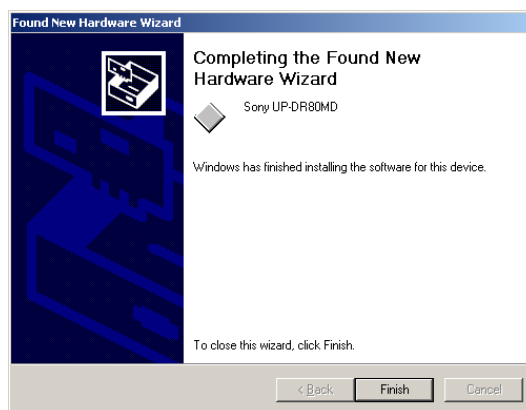

- 9 Κάντε κλικ στο κουμπί [Finish].

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή με τα Windows 2000.

- 10 Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Διαδικασία χωρίς το παρεχόμενο CD-ROM

- 6 Επιλέξτε [Specify a location] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί [Next].


Η οθόνη αλλάζει ως εξής.




- 7 Κάντε κλικ στο κουμπί [Browse] για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου [Locate File]. Ορίστε το φάκελο στον οποίο αποσυμπίεσατε το αρχείο εγκατάστασης που κατεβάσατε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί [Open] για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου [Locate File].

- 8 Κάντε κλικ στο κουμπί [OK].

Η οθόνη αλλάζει ως εξής.

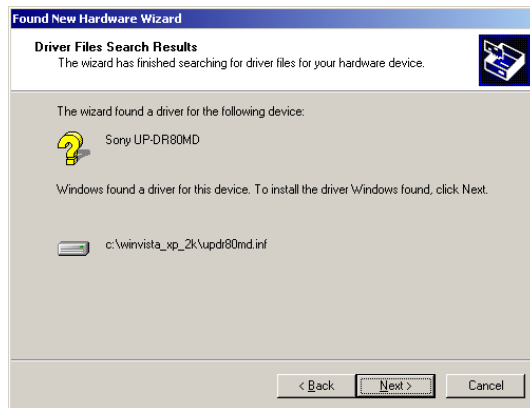


9 Κάντε κλικ στο κουμπί [Next].

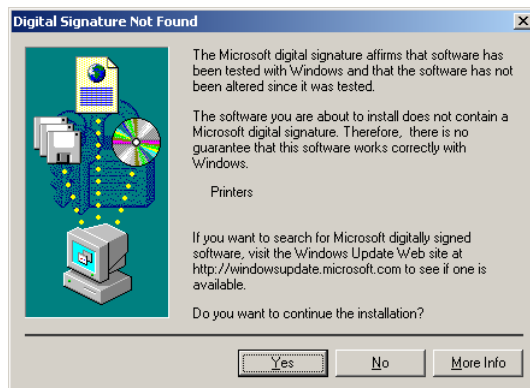

Αν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου [Digital Signature Not Found], κάντε κλικ στο κουμπί [Yes].

Μετά την αντιγραφή των αρχείων, η οθόνη αλλάζει ως εξής.

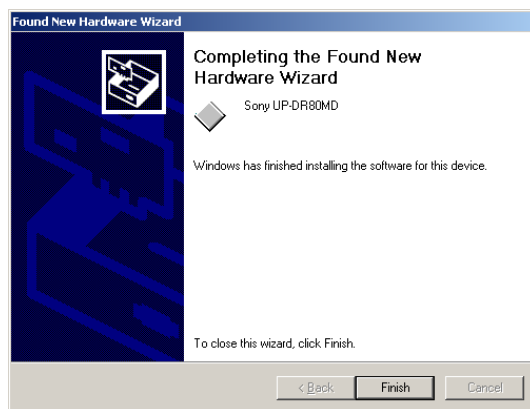

10 Κάντε κλικ στο κουμπί [Finish].

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή με τα Windows 2000.

11 Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σημείωση

Εάν επιλέξατε [Cancel] στο Βήμα 7 ή [No] στο Βήμα 8, μπορεί να μην εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard] κατά την επόμενη εγκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση εκτελέστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο "Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard]" στο Βήμα 3.


Απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows 2000

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η διαδικασία απεγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Σημείωση


Όταν ξεκινήσει η διαδικασία απεγκατάστασης, ο εκτυπωτής δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Found New Hardware Wizard], αποσυνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο [Cancel] σε όλες τις οθόνες για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου και μετά επανεκκινήστε τη διαδικασία απεγκατάστασης.

- 1 Σβήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή.
- 2 Ανάψτε τον υπολογιστή και συνδεθείτε ως διαχειριστής συστήματος ή ως μέλος της ομάδας Διαχειριστές.
- 3 Τοποθετήστε το δρομέα στο [Settings] του μενού [Start] και κάντε κλικ στο [Control Panel]. Στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο [Add/Remove Programs].

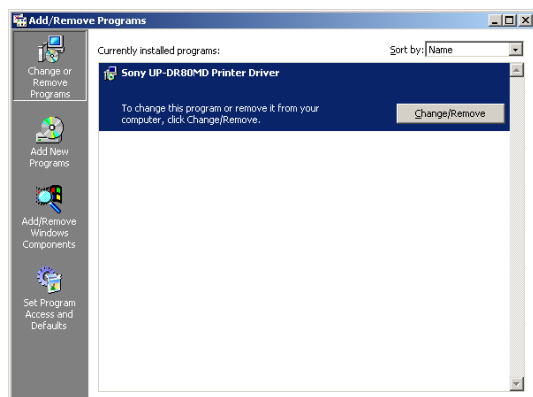


- 4** Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από τη λίστα [Currently installed programs] και μετά κάντε κλικ στο [Change/Remove].

Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

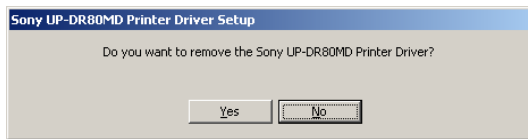

- 5** Κάντε κλικ στο [Yes].

Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

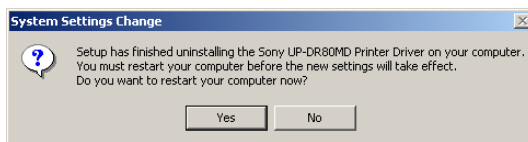

- 6** Κάντε κλικ στο [Yes].

Ο υπολογιστής εκτελεί επανεκκίνηση.

Έτσι ολοκληρώνεται η απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.